


TenZ

Botão com loop ajustável para
reconstrução dos ligamentos cruzados

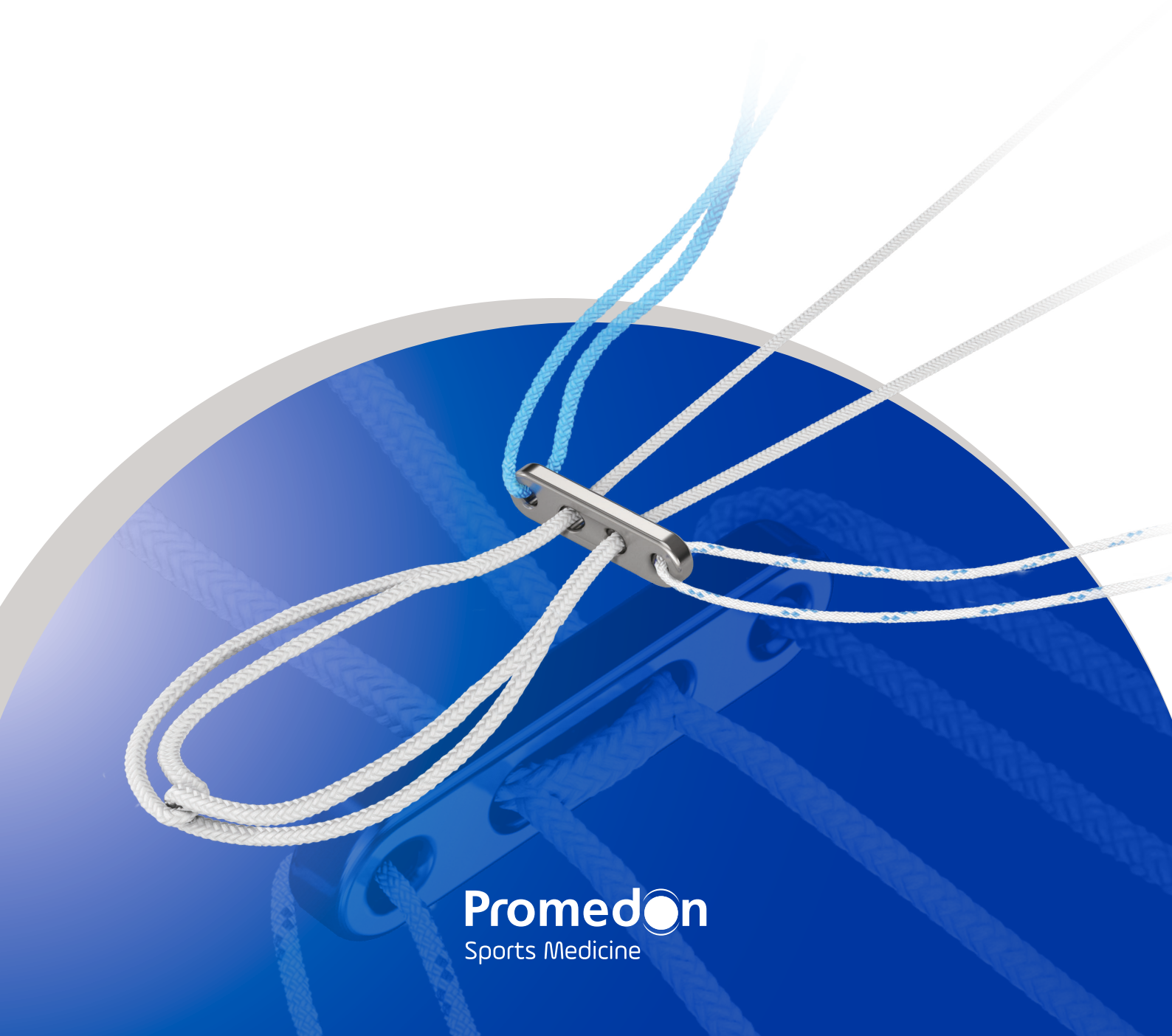

Promedon
Sports Medicine

TenZ

Mecanismo de travamento robusto e resistente ao deslizamento.

- Seu sistema ajustável e com travamento automático proporciona versatilidade, facilidade de uso, resistência e confiabilidade.
- O instrumental dedicado permite a perfuração em etapa única, reduzindo o tempo cirúrgico.
- Indicado para reconstrução de LCA e LCP
- Um único implante, para todos os tamanhos de túnel.


2,4 mm Deslizamento médio obtido após uma carga cíclica variável.¹


Desempenho compatível com os principais padrões do mercado internacional.

1

Loop ajustável

- Sistema com mecanismo autobloqueante por laço tipo "Chinese finger trap", com quatro pontos de bloqueio, eliminando a necessidade de nós.
- Permite o preenchimento completo do túnel ósseo pelo enxerto.

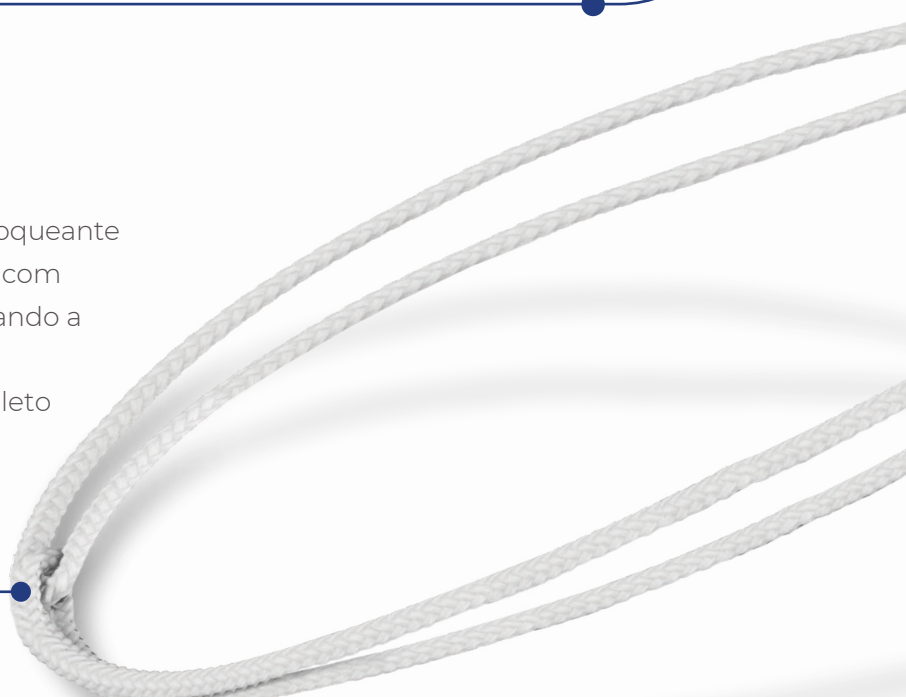

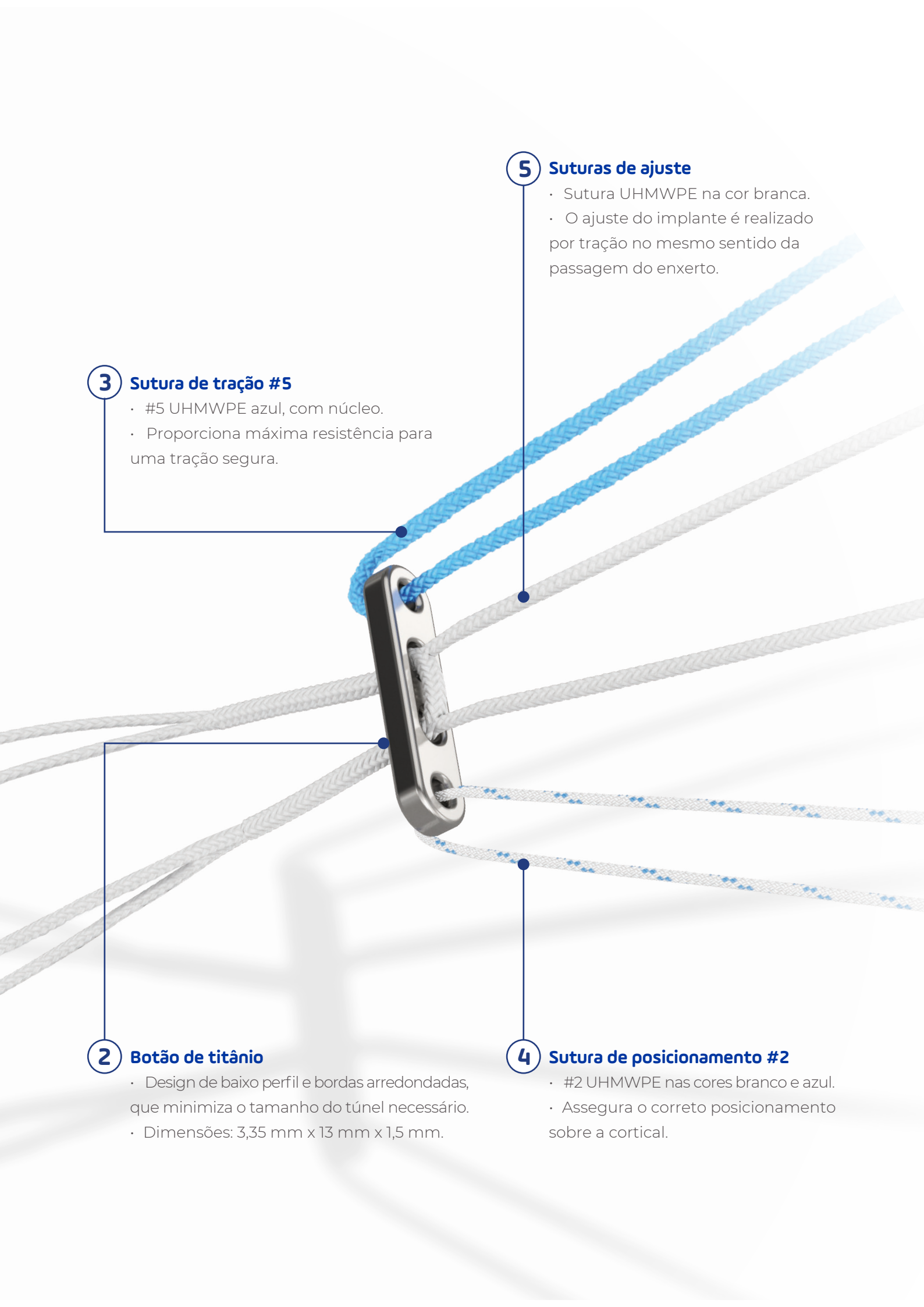

The diagram illustrates a surgical implant, likely a suture anchor, with five numbered callouts. Callout 1 points to the implant body. Callout 2 points to the titanium button. Callout 3 points to the #5 suture. Callout 4 points to the #2 suture. Callout 5 points to the adjustment suture. The implant is shown with a blue suture (#5) and a white suture (#2) passing through it. The implant is also shown with a titanium button (2) attached to it. The background is a light gray with a faint grid pattern.

3 Sutura de tração #5

- #5 UHMWPE azul, com núcleo.
- Proporciona máxima resistência para uma tração segura.

5 Suturas de ajuste

- Sutura UHMWPE na cor branca.
- O ajuste do implante é realizado por tração no mesmo sentido da passagem do enxerto.


2 Botão de titânio

- Design de baixo perfil e bordas arredondadas, que minimiza o tamanho do túnel necessário.
- Dimensões: 3,35 mm x 13 mm x 1,5 mm.

4 Sutura de posicionamento #2

- #2 UHMWPE nas cores branco e azul.
- Assegura o correto posicionamento sobre a cortical.

FORÇA, SEGURANÇA E VERSATILIDADE

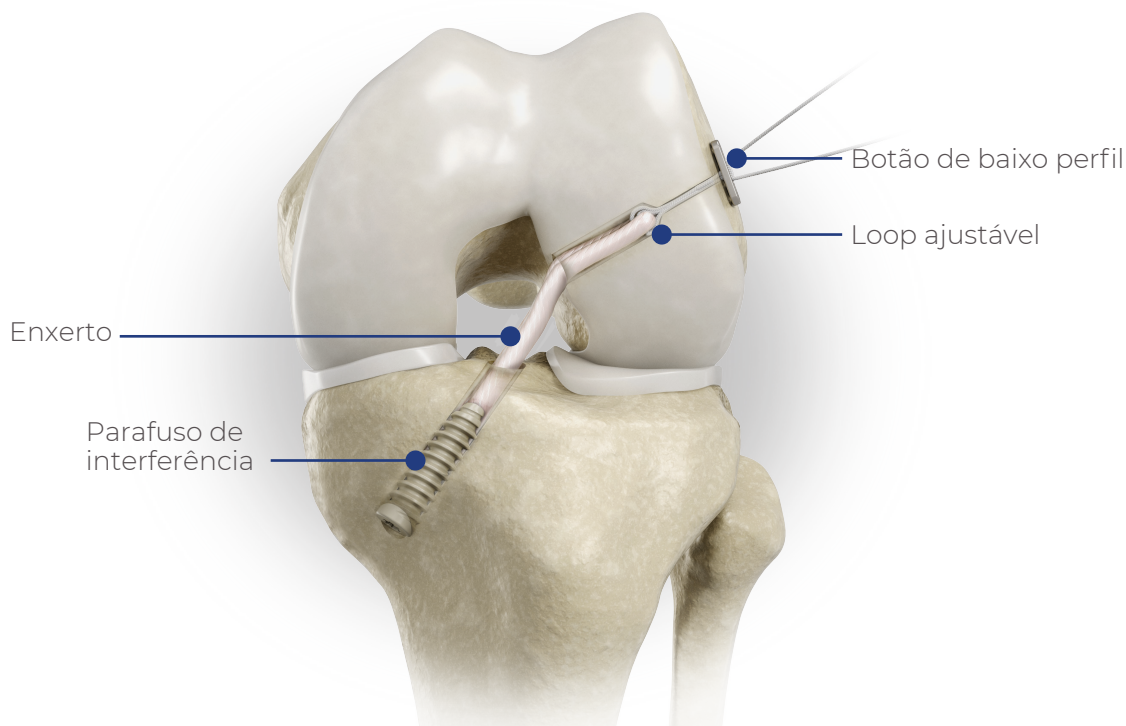

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

IMPLANTE

Código	Descrição
FG-BF601000	Botão de titânio com loop ajustável TenZ.

INSTRUMENTAIS DEDICADOS

Código	Descrição
FG-CN313040	Pino guia com ponta de espada de 4 mm com ilhó aberto, estéril.
FG-CN313240	Pino guia com ponta de espada de 4 mm com ilhó fechado, estéril.
FG-IN501047	Broca femoral canulada de 4,7 mm.
FG-CN305401	Pino guia com ponta broca de 2,4 mm com orifício para passagem de fio.
FG-CN305402	Pino guia com ponta diamantada de 2,4 mm com orifício para passagem de fio.

ANVISA N° 10306840213

A disponibilidade dos produtos pode variar de acordo com o mercado e as aprovações regulatórias locais. Consulte seu representante para obter mais informações.

Promedon
Sports Medicine