


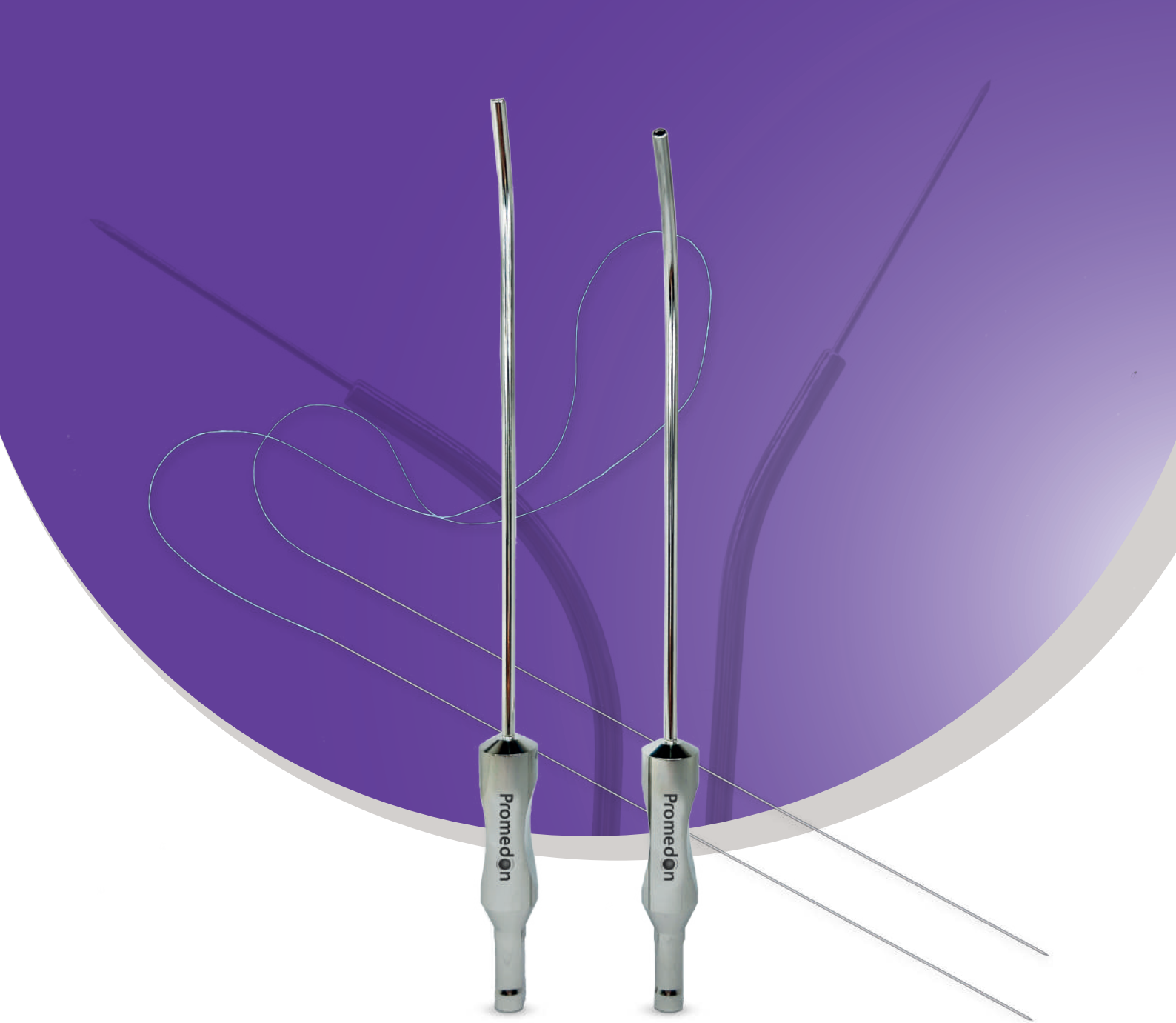

Surgical Technique Brochure

Reparación meniscal *inside-out* con
CordFit Meniscal Repair y Camisas Meniscales

CordFit Meniscal Repair

Posee una **sutura tipo cuerda #2-0 con dos agujas rectas** para reparaciones meniscales mediante técnica inside-out, accediendo principalmente al cuerno anterior y al cuerpo del menisco.

- Disponible en color azul.





Flexibilidad y resistencia

Sus dos agujas rectas de 320 mm de largo y 0,73 mm de diámetro, fabricadas en acero inoxidable otorgan máxima flexibilidad. Además, cuenta con un grafado de alta resistencia, que soporta cargas de más de 20 N. ¹



Pasaje sutil

Las agujas con punta diamante son ideales para perforar el menisco sin desgarrarlo. A su vez, su cubierta siliconada permite un pasaje suave a través del tejido.

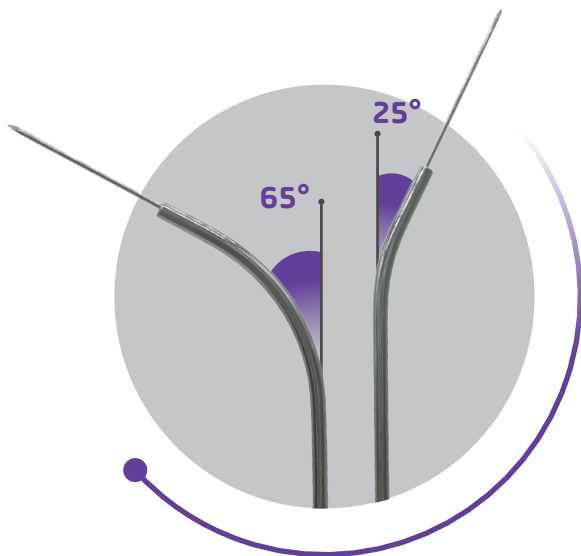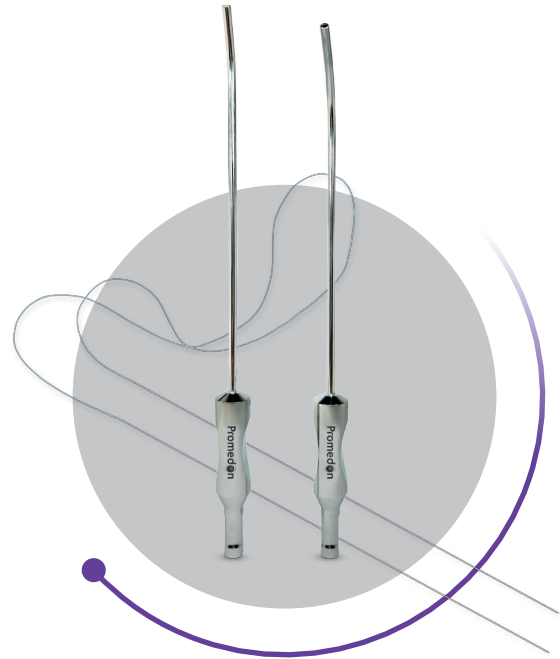

Instrumental asociado


Estas agujas se utilizan en conjunto con camisas de diferentes angulaciones, 25° y 65°, que permiten direccionar su pasaje a las zonas a reparar.

Las Camisas Meniscales cuentan con punta roma, que evita daños en el menisco durante el procedimiento.

1. Definido por ensayos internos según US Pharmacopeia.


Reparación Meniscal Inside-Out

Step by step

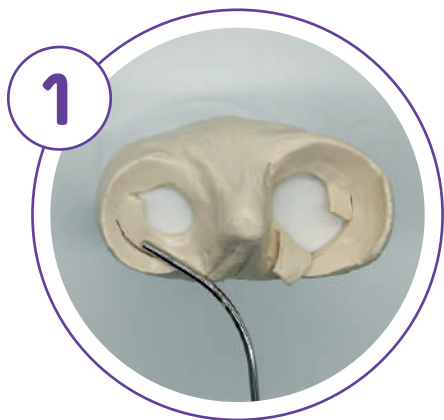

A través de una incisión, inserte la Camisa Meniscal en la zona de la lesión.


NOTA: se recomienda seleccionar la angulación de la Camisa Meniscal según la zona de lesión del menisco (ver página 1).

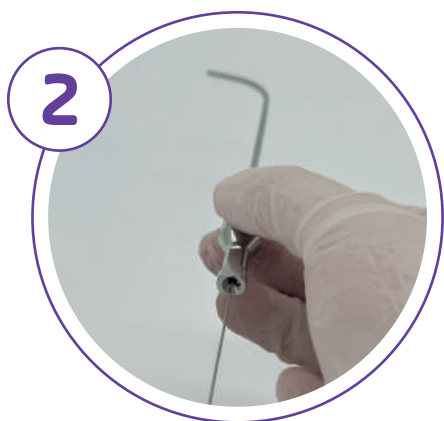

Utilizando la Camisa Meniscal, inserte en ella la aguja CordFit Meniscal Repair y acceda a la zona del menisco a reparar.


Procure introducir la aguja a una profundidad que no comprometa el tejido sano.

IMPORTANTE: En caso de corresponder, posicione el Protector Poplíteo en la región posterior de la cápsula articular para proteger las estructuras neurovasculares durante el procedimiento.

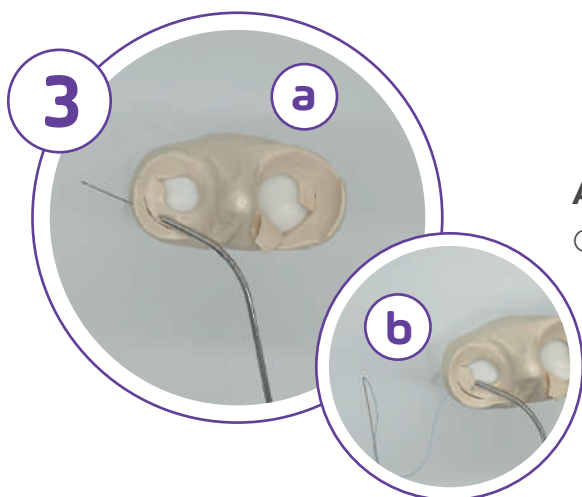

A. Tras atravesar el menisco, retire la aguja CordFit Meniscal Repair fuera de la articulación.


B. Mantenga la sutura en el lugar para facilitar el paso de la siguiente aguja.

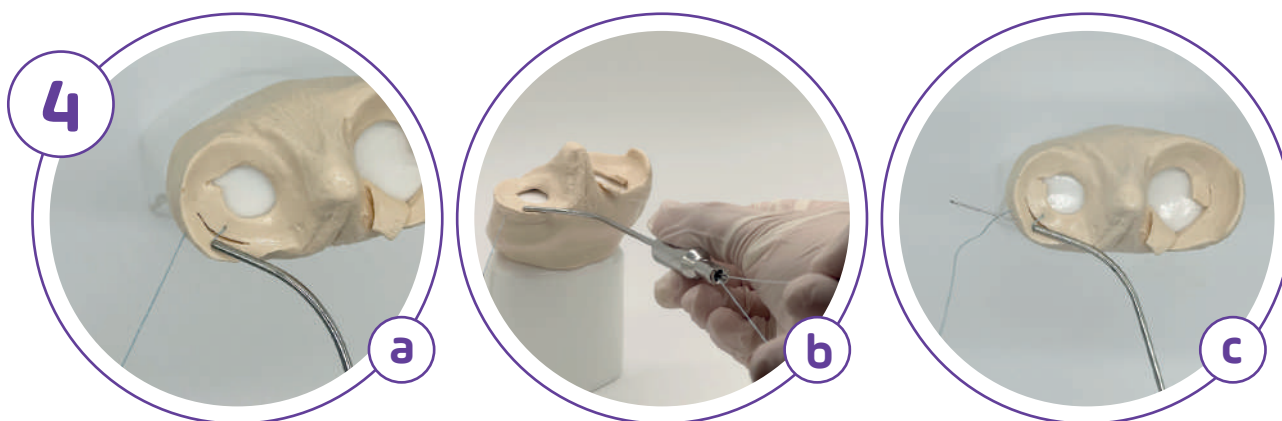

Posicione la Camisa Meniscal de manera adyacente a la primera sutura para crear una reparación vertical, horizontal u oblicua **(A)** y proceda a ingresar la segunda aguja **(B)**.

Después de extraer la segunda aguja fuera de la articulación, tire de la sutura para acercar los bordes del desgarró meniscal **(C)**. Este proceso se repite para cada punto de sutura necesario.

NOTA: se recomienda identificar y separar las suturas de cada punto para luego anudarlas.

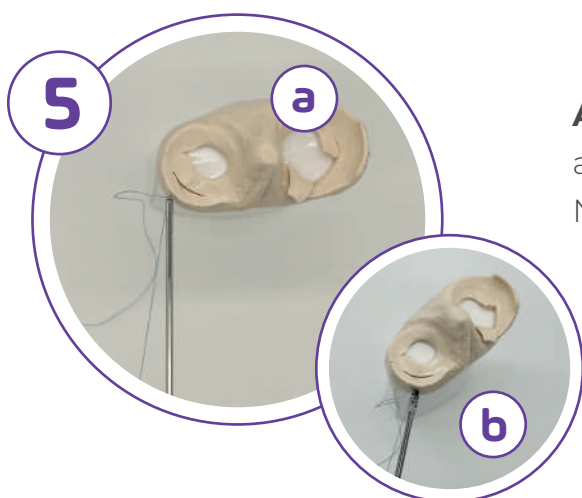


A. Fije la sutura mediante un nudo y aproxímelo a la cara lateral de la cápsula con el Empuja Nudos.

B. Luego, corte la sutura restante con la Pinza Corta Suturas.

6



Con el Gancho Palpador asegure que la reparación es estable y que los bordes del menisco están correctamente alineados.

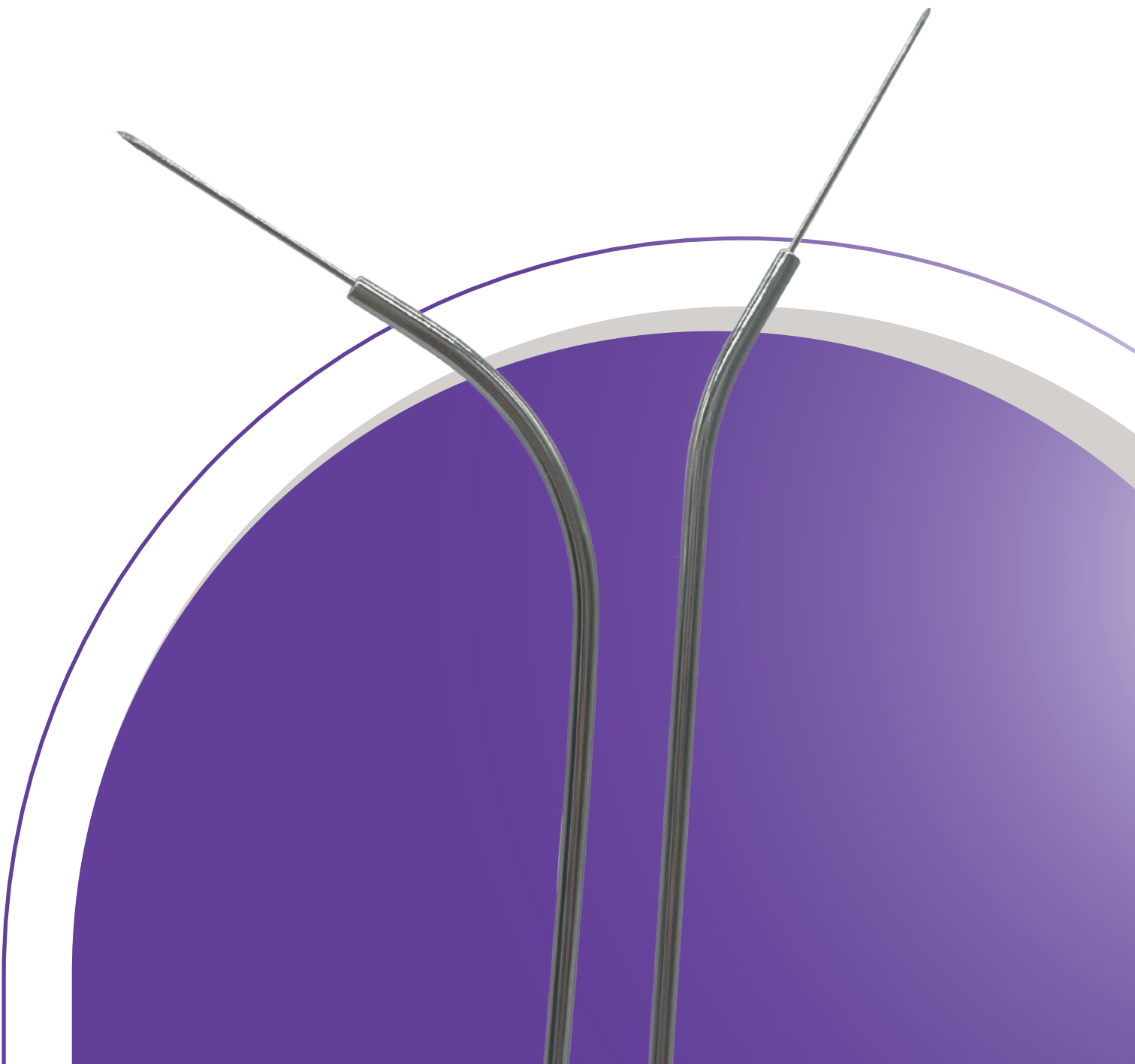

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Código	Descripción
FG-SU061120	Sutura CordFit Meniscal Repair #2-0 de UHMWPE, azul, con dos agujas.
FG-IN590025	Camisa para reparación meniscal con punta inclinada 25°.
FG-IN590065	Camisa para reparación meniscal con punta inclinada 65°.
FG-CN313100	Aguja meniscal de acero inoxidable con loop de nitinol, estéril.
FG-IN596000	Gancho palpador meniscal.
FG-IN593000	Protector poplíteo para reparación meniscal.
FG-IN691001	Caja para instrumental meniscal.
FG-IN093010	Pinza corta sutura con punta tijera.
FG-IN595000	Empuja nudo para sutura #2-0



BRO-0014 (02) / OCT-2026

La disponibilidad de los productos puede variar según el mercado y las aprobaciones regulatorias locales. Consulte con su representante para más información.