



Técnica Cirúrgica


SpinFit PK **Tenodesis**

Promedon
Sports Medicine

SpinFit PK **Tenodesis**


O dispositivo **SpinFit PK Tenodesis** foi desenvolvido para a fixação de tendões por meio da técnica inlay em túnel ósseo cego.

Disponível em PEEK nos diâmetros de **6, 7 e 8 mm**, com dispositivos de inserção codificados por cores para facilitar a identificação de cada tamanho.

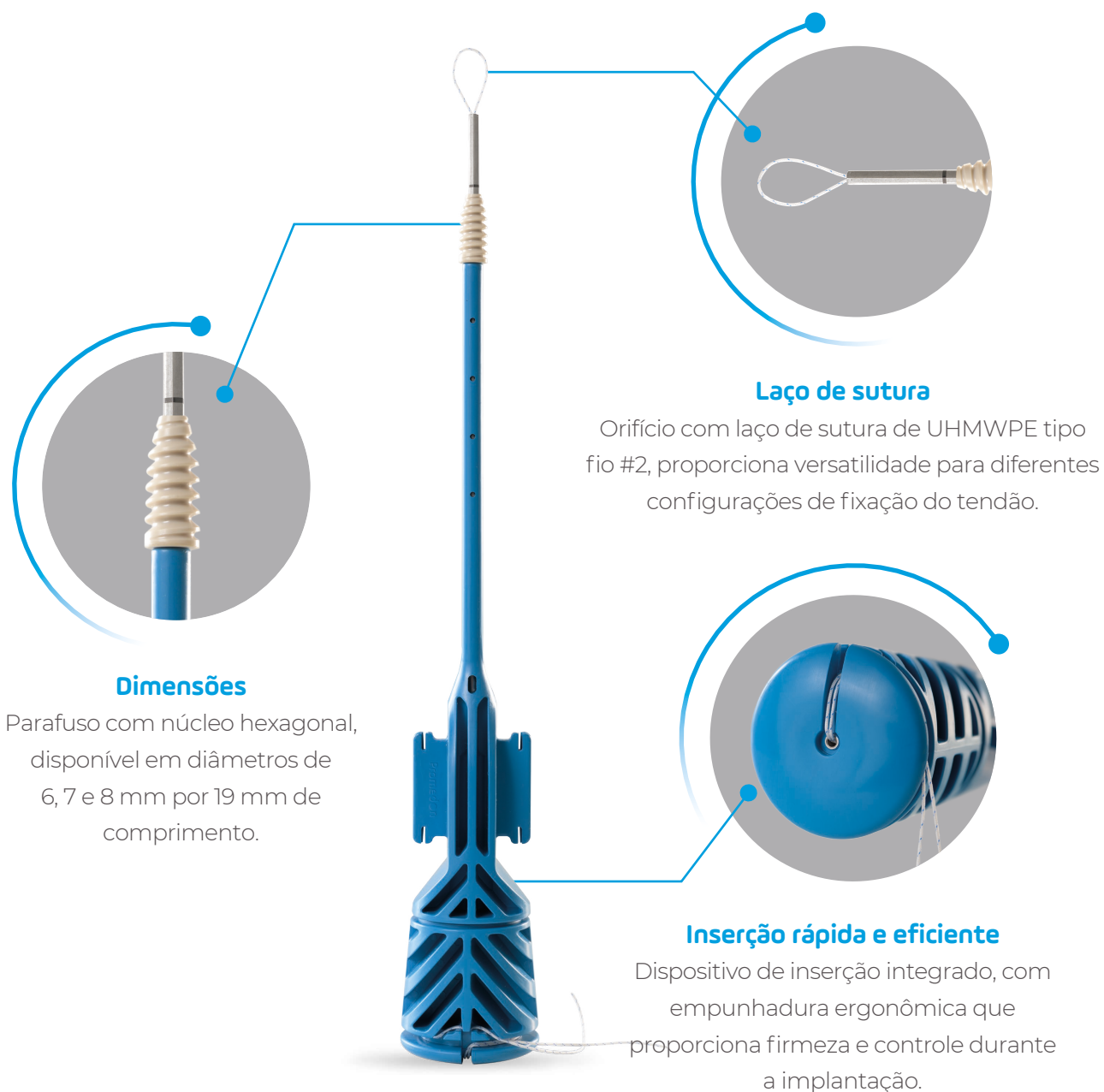

Técnica Cirúrgica


Passo a passo

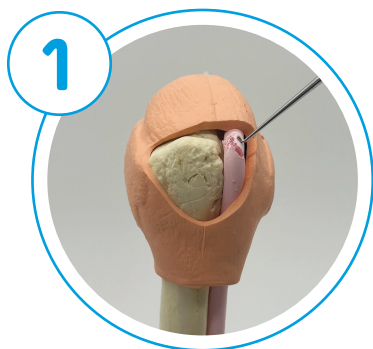

Identifique a zona danificada do tendão a ser reparado e o lugar a realizar a fixação.




Aproxime o tendão por cima do lugar de inserção selecionado, deixando sobressair uns 20 mm no extremo distal.

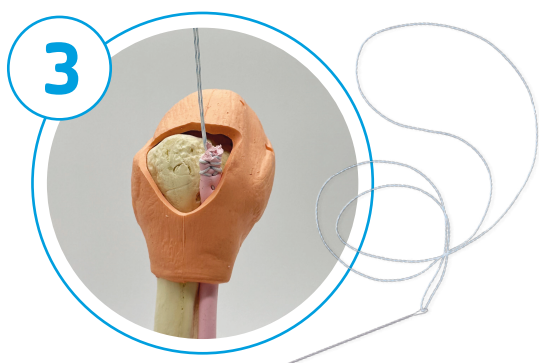

Por meio de uma mínima incisão, exponha o extremo do tendão a fim de suturar 20 mm do mesmo (recomenda-se o uso da sutura em loop com agulha reta, **CordFit Infinity #2**) deixando sutura disponível no extremo.



Meça o diâmetro do extremo do tendão suturado utilizando o medidor de enxerto da Promedon e escolha um parafuso correspondente à medida obtida.

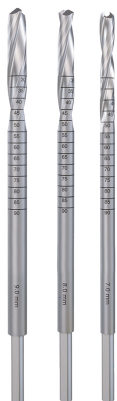


Faça um orifício com o pino-guia de 2,4 mm ponta broca no lugar de implantação. Sem retirá-lo, com uma broca do mesmo diâmetro do parafuso, faça uma perfuração **não inferior a 23 mm**.


NOTA: *sugere-se que a medida da broca escolhida equivalha 1:1 a medida do implante.*



Insira a sutura de preparação do tendão através do olhal de sutura do dispositivo de inserção.

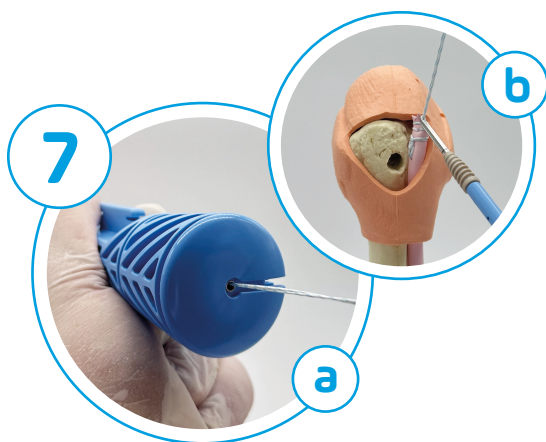

Libere a sutura de retenção do olhal **(A)** e puxe a mesma para ajustar o loop de sutura contra a sutura de preparação do tendão, no extremo do mesmo **(B)**.

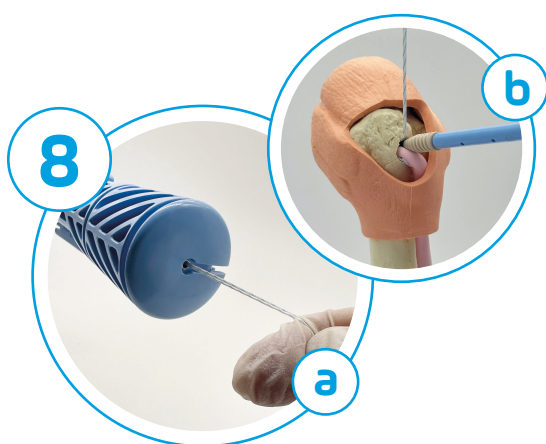

Com a precaução de não perder a tensão da sutura do olhal **(A)**, posicione o dispositivo de inserção junto ao extremo do tendão dentro do orifício ósseo **(B)** até a marca a laser.


IMPORTANTE: *mantenha a tensão do olhal e da sutura de preparação do tendão, ao menos até a primeira rosca do parafuso ingressar no orifício ósseo.*

9




Uma vez verificada a tensão desejada do tendão, gire o extremo proximal do dispositivo de inserção em sentido horário segurando o cabo para introduzir o implante rumo ao interior do orifício ósseo, até o mesmo ter sido totalmente introduzido.

10

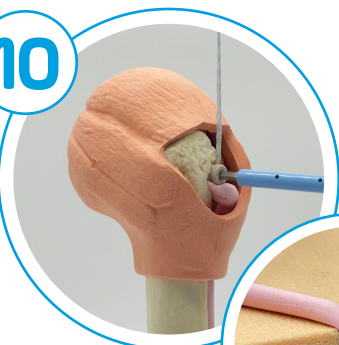

Remova o dispositivo de inserção.

IMPORTANTE: sugere-se atar a sutura do loop com a sutura de preparação do enxerto.

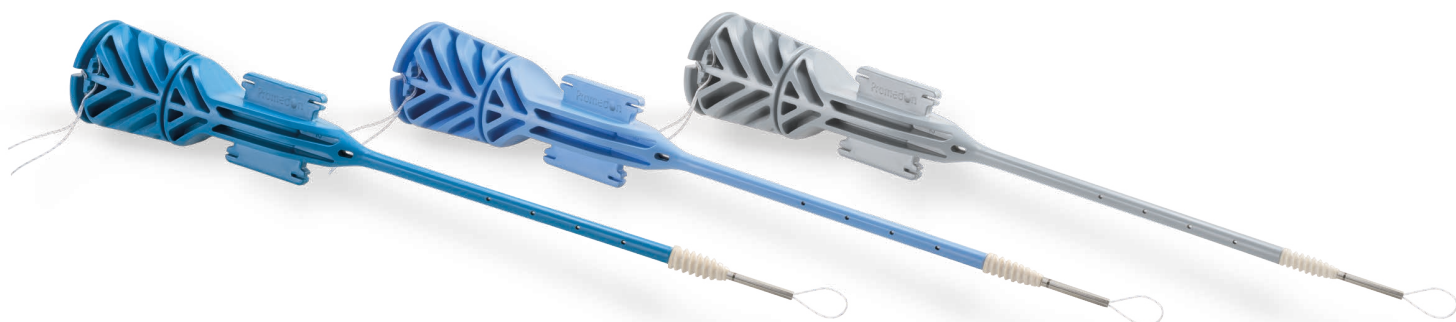

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

IMPLANTE

Código	Descrição
FG-TN120006	Implante SpinFit PK Tenodesis de 6 x 19 mm, de PEEK, com laço de sutura.
FG-TN120007	Implante SpinFit PK Tenodesis de 7 x 19 mm, de PEEK, com laço de sutura.
FG-TN120008	Implante SpinFit PK Tenodesis de 8 x 19 mm, de PEEK, com laço de sutura.

PRODUTOS RELACIONADOS

Código	Descrição
FG-SU040102	Sutura CordFit Infinity #2 de UHMWPE, branca-azul, em loop, com agulha reta e loop de nitinol.
FG-SU030102	Sutura CordFit with Tapered Needle #2 de UHMWPE, branca-azul, com agulha 1/2 C.

INSTRUMENTAL DEDICADO

Código	Descrição
FG-CN305401	Pino-guia de 2,4 mm ponta broca com orifício.
FG-IN500006	Broca tibial canulada de 6 mm.
FG-IN500007	Broca tibial canulada de 7 mm.
FG-IN500008	Broca tibial canulada de 8 mm.
FG-IN520020	Medidor de diâmetro do enxerto.

BRO-0031 (01) / SEP-2026