

Sistema de Reparo Meniscal

Solidez e segurança em
procedimentos articulares



Promedon
Sports Medicine


SelfPass

de Joelho


A **SelfPass de Joelho** oferece uma passagem de suturas precisa e controlada. Seu design em aço inoxidável e de baixo perfil, aliado ao seu sistema de agulha otimizado, facilita a realização de pontos de sutura confiáveis, mesmo em áreas de difícil acesso, contribuindo para a proteção das estruturas articulares.

1 Acesso otimizado para espaços reduzidos

Sua ponta foi desenvolvida especificamente para alcançar as áreas mais estreitas do compartimento articular.

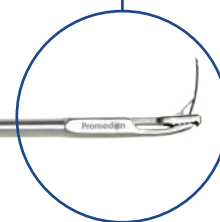

2

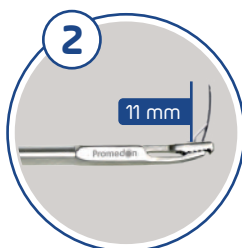

Agulha com ponta de nitinol

Combina flexibilidade e resistência, permitindo uma passagem suave e controlada através do tecido meniscal.

3



Entalhe cônico que permite a retenção de suturas

CordFit #2, CordFit #2-0 e TapeFit de 1,5 mm.

4

Empunhadura ergonômica

Possui uma morfologia ergonômica e intuitiva, proporcionando maior precisão.




Raiz Meniscal




Guia com gancho tibial de raiz meniscal

Possui uma pá reta na extremidade distal e uma cavidade que proporciona estabilidade em reparos de raiz meniscal. Além disso, a marca a laser presente na ponta oferece uma maior precisão na saída do pino-guia.

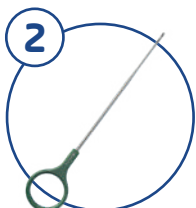

Empurrador de nós para sutura #2-0


Projetado para empurrar e assentar nós deslizantes até sua posição final durante reparos meniscais. É compatível com suturas #2-0.

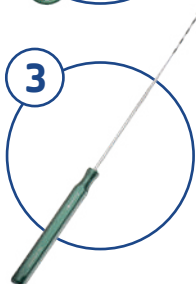

Probe

Possui uma ponta de gancho de 3,5 mm e uma haste com marcas a laser com intervalos de 5 mm.

Inside-Out

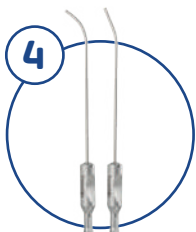

Camisas meniscais


Apresentam-se em angulações de 25° e 65°, que permitem direcionar a passagem das agulhas para as áreas a serem reparadas pela técnica inside-out. Sua ponta romba evita danos ao menisco durante o procedimento.



Inclinação de 55°

Protetor poplíteo

Oferece proteção às estruturas vasculonervosas críticas durante o procedimento de reparo por meio de técnica *inside-out*.

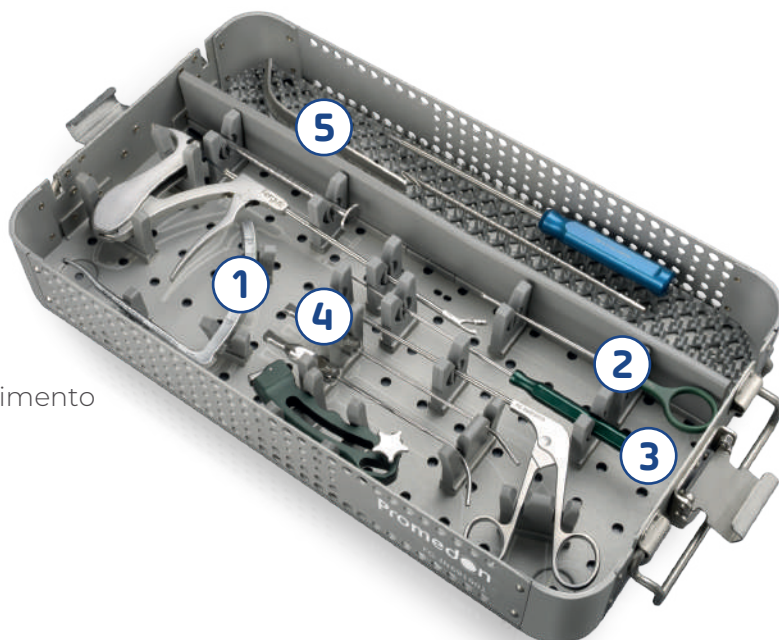

INFORMAÇÃO DE PRODUTO

INSTRUMENTAIS

Código	Descrição
FG-CN305901	Agulha para pinça SelfPass de joelho, estéril.
FG-IN591011	Gancho tibial para raiz meniscal.
FG-IN590000	Pinça SelfPass de joelho.
FG-IN093010	Pinça corta sutura com ponta de tesoura.
FG-IN501047	Fresa femoral canulada de 4,7 mm.
FG-IN001147	Punção rosqueada para SpinFit de 4,7 mm.
FG-IN081047	Broca para Knotix de 5,5 mm e SpinFit de 4,7 mm.
FG-IN596000	Probe meniscal.
FG-CN305401	Pino-guia de 2,4 mm com ponta tipo broca e olhal.
FG-IN540000	Cabo para gancho tibial ou femoral.
FG-IN542024	Cânula para pino-guia de 2,4 mm.
FG-IN593000	Protetor Poplíteo.
FG-IN691001	Caixa de Instrumental Meniscal.
FG-IN590025	Camisa para reparação meniscal com ponta inclinada 25°.
FG-IN590065	Camisa para reparação meniscal com ponta inclinada 65°.
FG-IN595000	Empurrador de nós para sutura #2-0.

PRODUTOS ASSOCIADOS

Código	Descrição
FG-SU011120	Sutura CordFit #2-0 de UHMWPE, azul, de 38" (96 cm) de comprimento.
FG-SU011102	Sutura CordFit #2 de UHMWPE, azul, de 38" (96 cm) de comprimento.
FG-SU711115	Sutura TapeFit, tipo fita, de 1,5 mm de UHMWPE, azul, de 38" (96 cm) de comprimento.
FG-AN012047	Âncora SpinFit PK de 4,7 mm x 19,1 mm sem sutura.
FG-SU021102	Sutura CordFit Stiff #2 de UHMWPE, azul, com extremidade endurecida.
FG-SU061120	Sutura CordFit Meniscal Repair #2-0 de UHMWPE, azul, com duas agulhas.
FG-CN313100	Agulha de aço inoxidável com loop de nitinol, estéril.

ANVISA Nº 10306849024 (Instrumentos estéreis)
ANVISA Nº 10306840200 (Instrumentos não estéreis)

A disponibilidade dos produtos pode variar de acordo com o mercado e as aprovações regulatórias locais. Consulte seu representante para obter mais informações.

Promedon
Sports Medicine