



Surgical Technique Brochure

Reparación de la **Raíz Meniscal**

Promedon
Sports Medicine

Surgical Technique Brochure

Un **sistema completo para la reparación de la raíz meniscal** que integra instrumentales diseñados para guiar con precisión cada paso de la técnica quirúrgica.



SpinFit PK

El anclaje de PEEK de 4,7 mm, SpinFit PK, permite la fijación final sin nudos, proporcionando una reparación estable y reproducible.

Pinza SelfPass de Rodilla

La pinza pasadora de suturas SelfPass de Rodilla, de bajo perfil, simplifica el pasaje de suturas en los espacios más estrechos de la rodilla.



Gancho de Raíz Meniscal

El gancho de raíz meniscal permite orientar de manera directa el fresado tibial hacia la huella anatómica de la raíz.




CordFit Stiff

La sutura CordFit Stiff facilita el rescate y manejo de las suturas intraarticulares.

Técnica quirúrgica

Step by step

CONFECCIÓN DEL TÚNEL TIBIAL

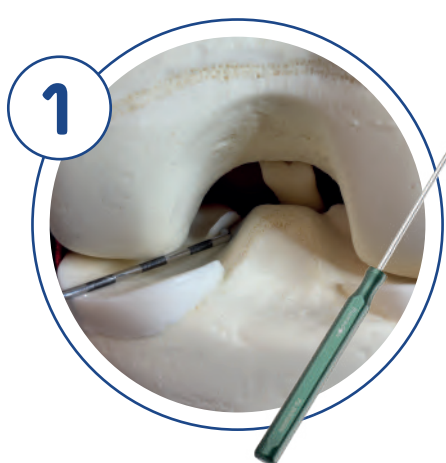

Con el **gancho palpador**, asegúrese de identificar la zona de la lesión a reparar.



Coloque el **gancho tibial para raíz meniscal** sobre la parte posterior de la tibia, en la ubicación deseada para la reinserción del tejido.




3



Utilice un **pin punta broca de 2,4 mm** e introdúzcalo por la camisa guía. Perfore avanzando hasta que el pin contacte con la punta del gancho tibial.

4

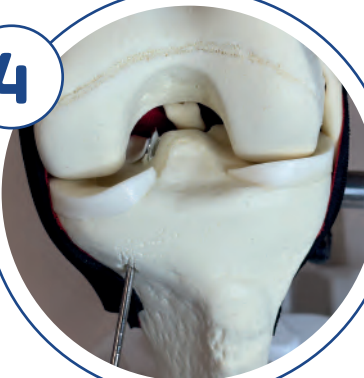


Retire el gancho tibial y la camisa guía, dejando insertado el pin guía.


5



Utilizando la **fresa canulada de 4,7 mm**, realice el túnel tibial usando el pin de 2,4 mm como guía **(a)**. Perfore hasta que el extremo de la fresa sea visible en la superficie del platillo tibial **(b)**.

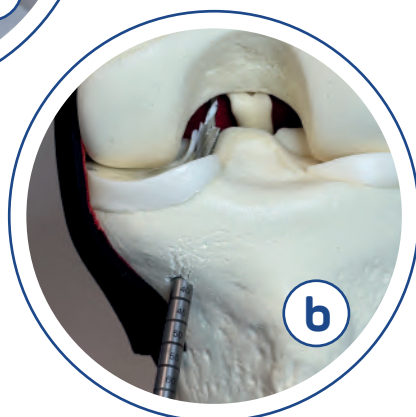


PASAJE DE SUTURA

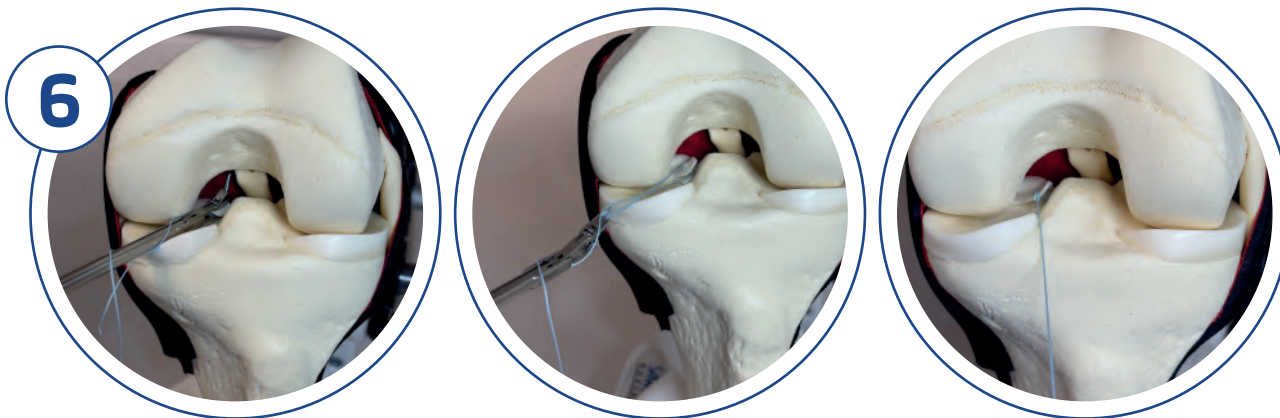


Utilice la **Pinza SelfPass de Rodilla** para el pasaje de la sutura CordFit #2-0 y realice un punto en cincha. Puede utilizar otra CordFit #2-0 para crear un segundo punto.

NOTA: puede optar por utilizar sutura CordFit #2-0, CordFit #2 o TapeFit 1,5 mm.

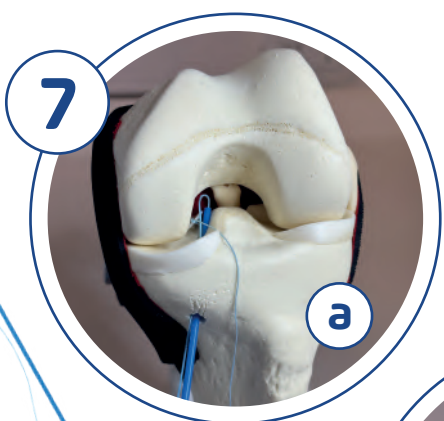


Introduzca la sutura con extremo endurecido, **CordFit Stiff**, por el túnel tibial **(a)**. Utilice el extremo de CordFit Stiff para capturar las suturas intraarticulares y trasladarlas hacia la tibia anterior **(b)**.

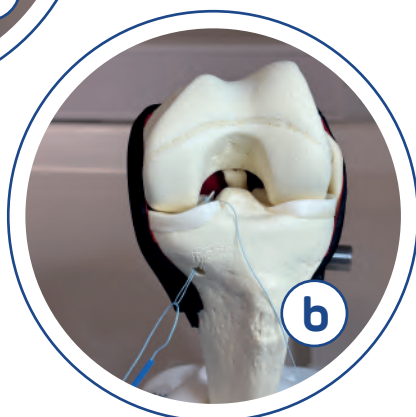

ANCLAJE FINAL

Se utilizará el ancla sin nudos de PEEK **SpinFit PK de 4,7 mm** para finalizar el procedimiento de raíz meniscal.

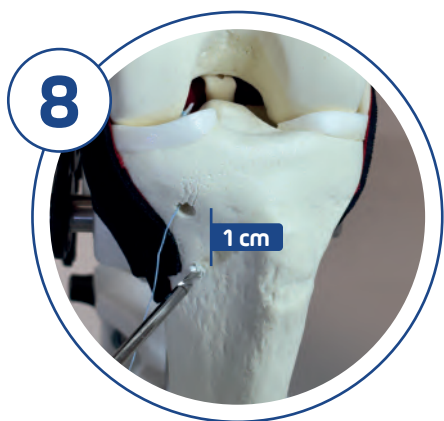


Para preparar el orificio en el que ingresará el ancla, extiéndase 1 cm de distancia del túnel tibial y con la **Broca para Knotix de 5,5 mm y SpinFit de 4,7 mm** realice el orificio hasta la marca láser indicada.




Con el **Punzón roscado para SpinFit de 4,7 mm** elabore una huella roscando hasta la marca láser.

10

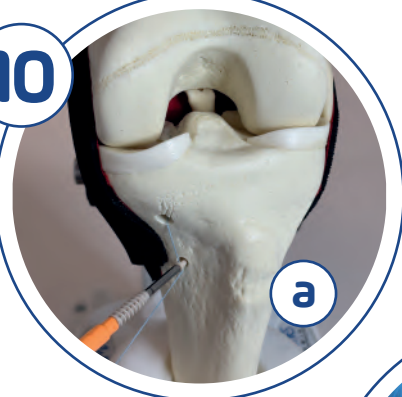

Pase la(s) sutura(s) a través del ojal de **SpinFit PK**. Luego, tense la(s) sutura(s) para lograr una reducción anatómica de la raíz meniscal y coloque el ancla dentro del orificio **(a)**.

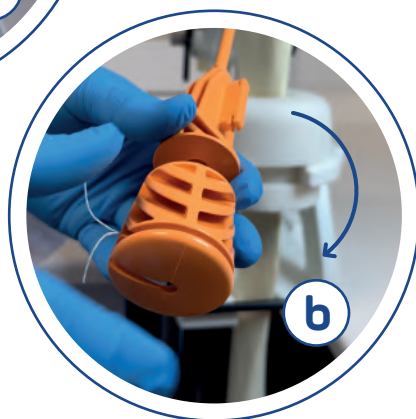


Manteniendo el mango de **SpinFit PK** fijo, gire el extremo del dispositivo en sentido horario hasta dejar de visualizar el cuerpo del anclaje **(b)**.




11

Arreglo final

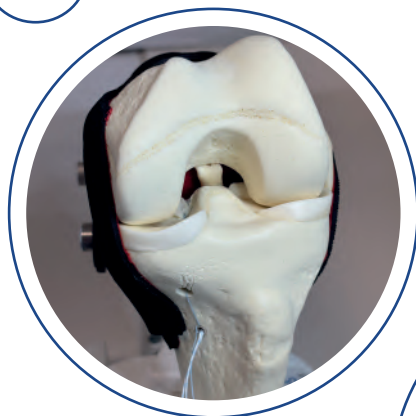

Con el **Gancho palpador meniscal** corrobore la integridad del arreglo.

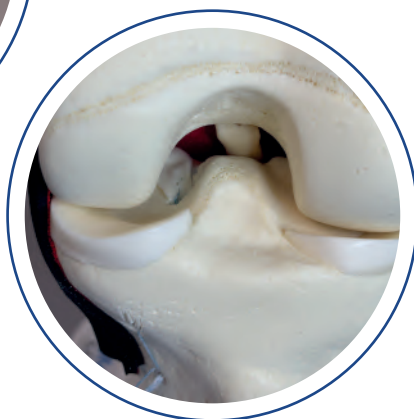

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

INSTRUMENTALES

Código	Descripción
FG-CN305901	Aguja para pinza SelfPass de rodilla, estéril.
FG-IN591011	Gancho tibial para raíz meniscal.
FG-IN590000	Pinza SelfPass de rodilla.
FG-IN501047	Fresa femoral canulada de 4,7 mm.
FG-IN001147	Punzón roscado para SpinFit de 4,7 mm.
FG-IN081047	Broca para Knotix de 5,5 mm y SpinFit de 4,7 mm.
FG-IN596000	Gancho palpador meniscal.
FG-CN305401	Pin guía de 2,4 mm punta broca con ojal.
FG-IN540000	Mango para gancho tibial o femoral.
FG-IN542024	Camisa para pin guía de 2,4 mm.
FG-IN691001	Caja para Instrumental Meniscal

BRO-0017 (03) / OCT-2026

PRODUCTOS ASOCIADOS

Código	Descripción
FG-SU011120	Sutura CordFit #2-0 de UHMWPE, azul, de 38" (96 cm) de longitud.
FG-SU011102	Sutura CordFit #2 de UHMWPE, azul, de 38" (96 cm) de longitud.
FG-SU711115	Sutura TapeFit, tipo cinta, de 1,5 mm de UHMWPE, azul, de 38" (96 cm) de longitud.
FG-AN012047	Ancla SpinFit PK de 4,7 mm x 19,1 mm sin sutura.
FG-SU021102	Sutura CordFit Stiff #2 de UHMWPE, azul, con extremo endurecido.