


QuickFit PK

Rapidez y seguridad
en la reparación sin nudos

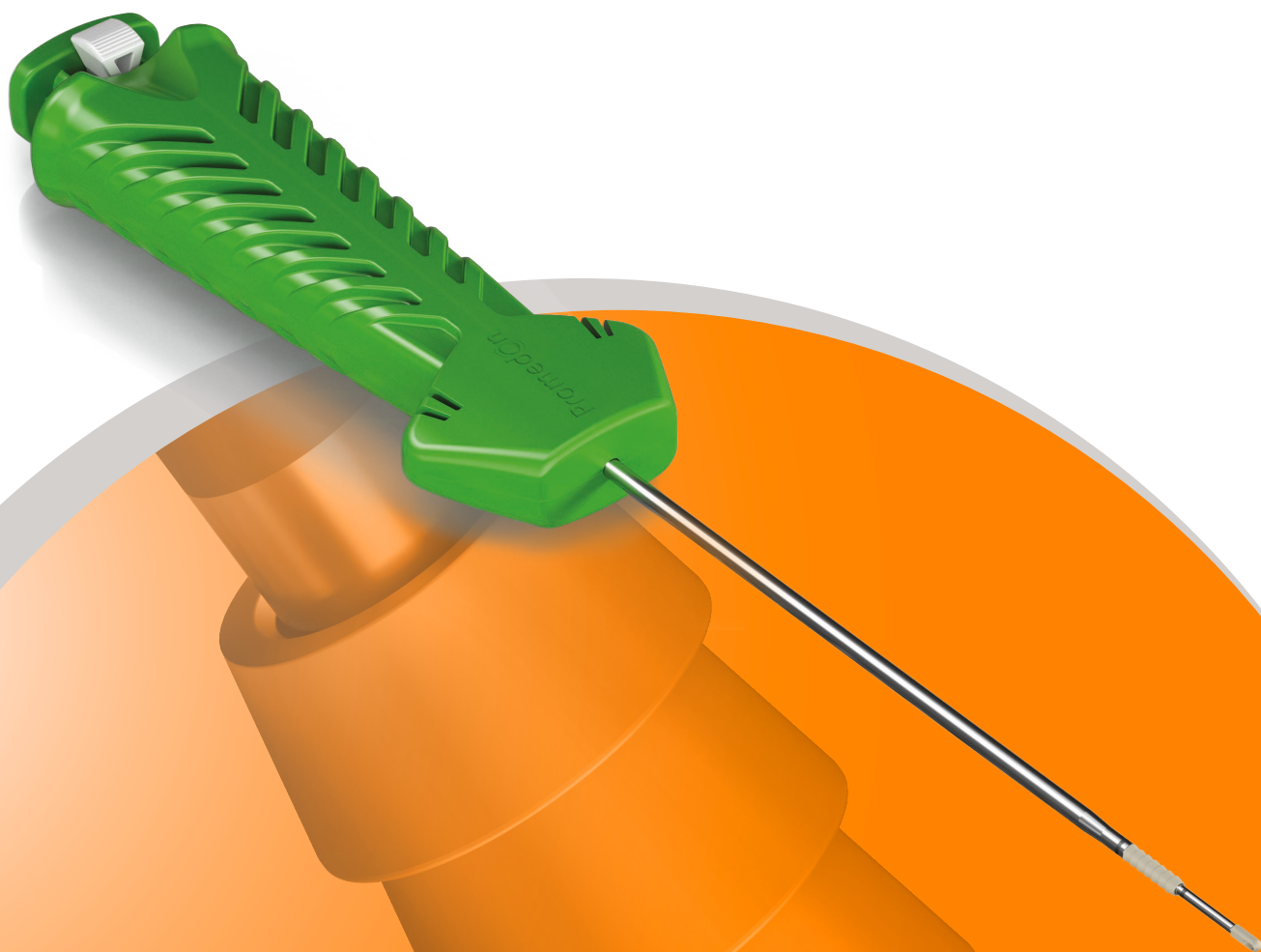

Promedon
Sports Medicine

QuickFit PK

Fijaciones seguras, máxima estabilidad.


El ancla impactada **QuickFit PK de 2,9 mm** está diseñada para lograr una rápida fijación del tejido en reparaciones sin nudos.

Dimensiones

2,9 mm de diámetro
por 15,5 mm de longitud.

Implantación precisa

Sus marcas láser permiten identificar la profundidad de implantación adecuada.

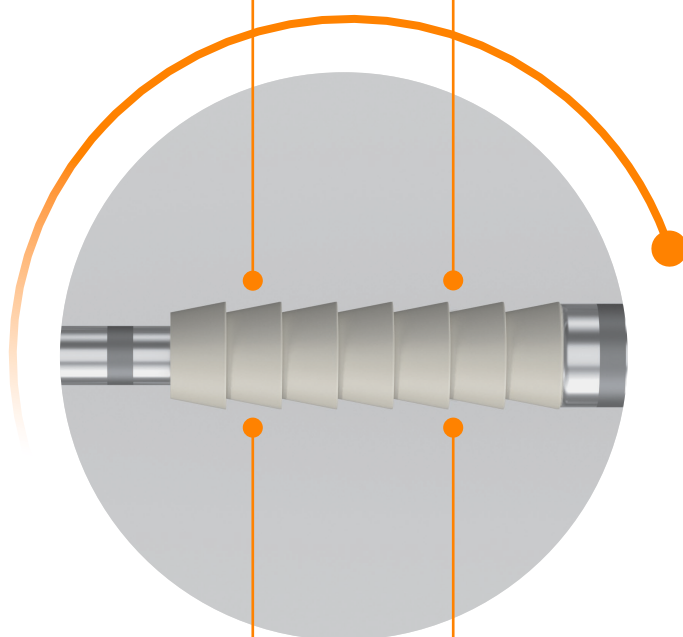

Desarrollada en PEEK

Su módulo de elasticidad similar al tejido óseo posibilita un mejor desempeño biomecánico.

Espigas pronunciadas

Garantizan un bloqueo seguro del implante en el tejido óseo.

Diseño innovador para una performance eficiente.




Zona de impacto de alta resistencia con clip de seguridad de desacople rápido.

Zona de sujeción amplia para mayor precisión y control durante la implantación.

Zona de retención de suturas para bloquear la tensión de la sutura en la etapa de preimplantación.

Compatible con sutura tipo cinta de 1,5 mm para aumentar la superficie de contacto con el labrum en la reparación.

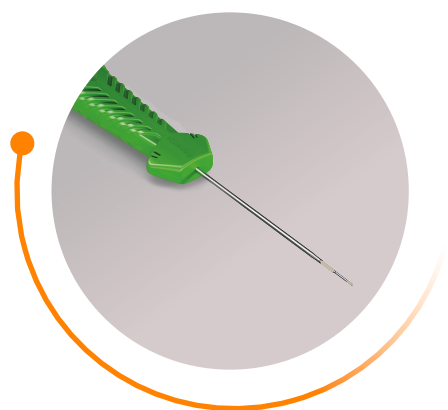

Ojal distal para un correcto aseguramiento de sutura.

ANCLAJE OPTIMIZADO

-  Fijación segura.
-  Diseño ergonómico.
-  Fácil y rápida inserción.
-  Mejora la interacción con el tejido blando gracias a su compatibilidad con sutura tipo cinta de 1,5 mm.



INFORMACIÓN DE PRODUCTO

IMPLANTE

Código	Descripción
FG-AN022029	Ancla QuickFit PK de 2,9 mm x 15,5 mm.

PRODUCTOS ASOCIADOS

Código	Descripción
FG-SU711115	Sutura TapeFit, tipo cinta, de 1,5 mm de UHMWPE, azul, de 38" (96 cm) de longitud.
FG-CN910670	Cánula rígida roscada de 6 mm x 70 mm con obturador descartable.
FG-CN910690	Cánula rígida roscada de 6 mm x 90 mm con obturador descartable.
FG-CN910870	Cánula rígida roscada de 8 mm x 70 mm con obturador descartable.
FG-CN910890	Cánula rígida roscada de 8 mm x 90 mm con obturador descartable.

INSTRUMENTAL ASOCIADO

Código	Descripción
FG-IN082029	Broca para QuickFit de 2,9 mm.
FG-IN013000	Guía de implantación de 3,2 mm.

Indicación de uso: Las anclas de PEEK se indican para la fijación de tejidos blandos al hueso.
En Ecuador: REGISTRO SANITARIO No. 16687-DME-0524.

La disponibilidad de los productos puede variar según el mercado y las aprobaciones regulatorias locales. Consulte con su representante para más información.

Promedon
Sports Medicine