


TenZ

El botón con loop ajustable para
la reconstrucción de los ligamentos cruzados

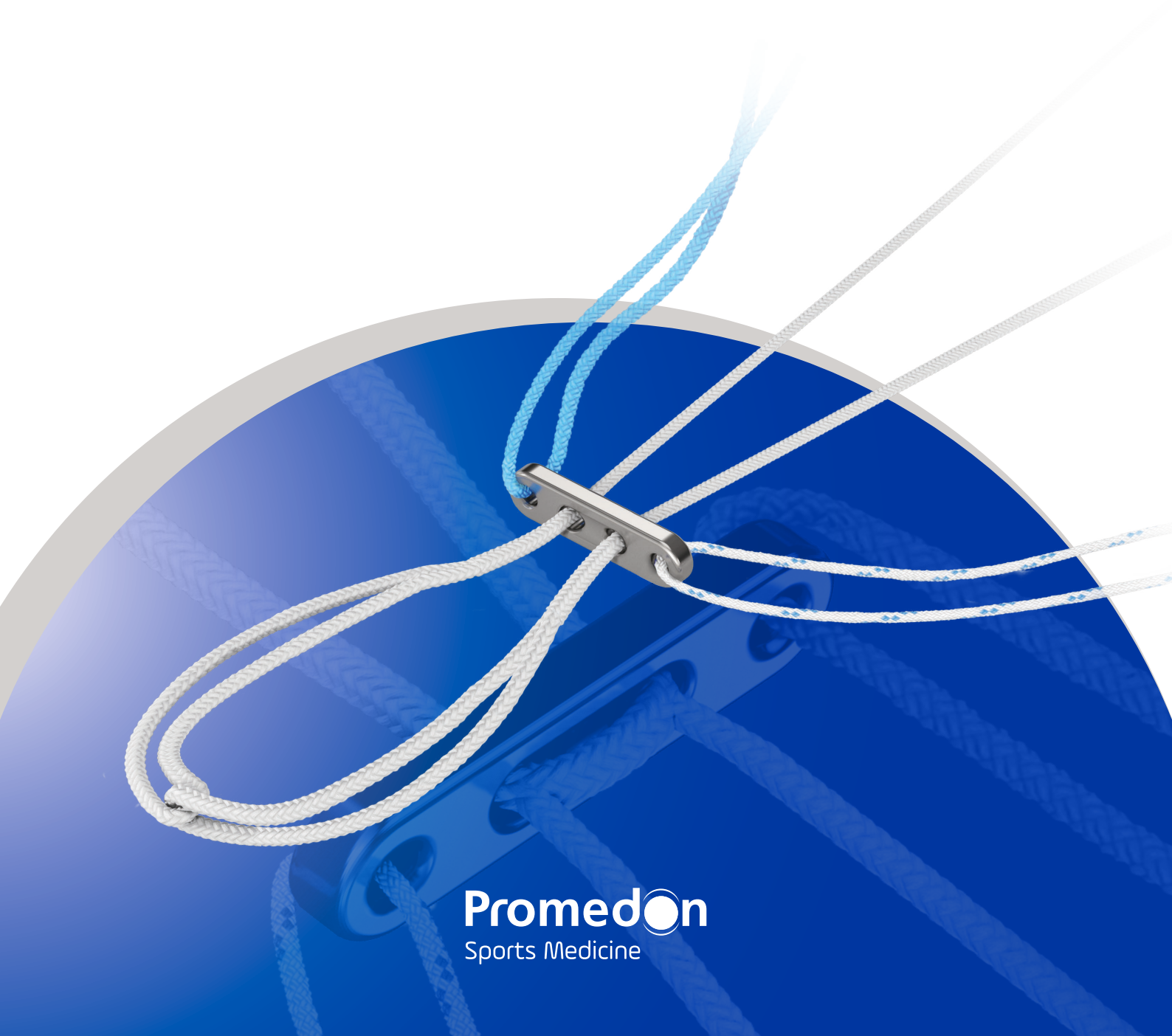

Promedon
Sports Medicine

TenZ

Mecanismo de bloqueo fuerte y resistente al deslizamiento.

- Su sistema ajustable y autobloqueante lo hace versátil y fácil de usar, fuerte y confiable.
- Su instrumental asociado permite una perforación de un solo paso, disminuyendo el tiempo necesario de cirugía.
- Indicado para reconstrucción de LCA y LCP.
- Un único implante, para todos los tamaños de túnel.

2,4 mm Deslizamiento promedio obtenido luego de una carga cíclica variable.¹

Performance a nivel de productos líderes en el mercado internacional.

1

Loop ajustable

- Con sistema autobloqueante de amarraderas chinas con 4 puntos de bloqueo, eliminando la necesidad de anudado.
- Permite ocupar completamente el túnel óseo con el injerto.



3 Sutura de tracción #5

- #5 UHMWPE de color azul, con núcleo necesario.
- Brinda una máxima resistencia para traccionar con confianza.

5 Suturas de ajuste

- Sutura UHMWPE de color blanco.
- El ajuste del implante se realiza traccionando en la misma dirección que avanza el injerto.


2 Botón de titanio

- Diseño de bajo perfil y bordes redondeados, que minimiza el tamaño del túnel necesario.
- Dimensiones: 3,35 mm x 13 mm x 1,5 mm.

4 Sutura de giro #2

- #2 UHMWPE de color blanco-azul.
- Asegura el correcto posicionamiento sobre la cortical.

FUERZA, SEGURIDAD Y VERSATILIDAD

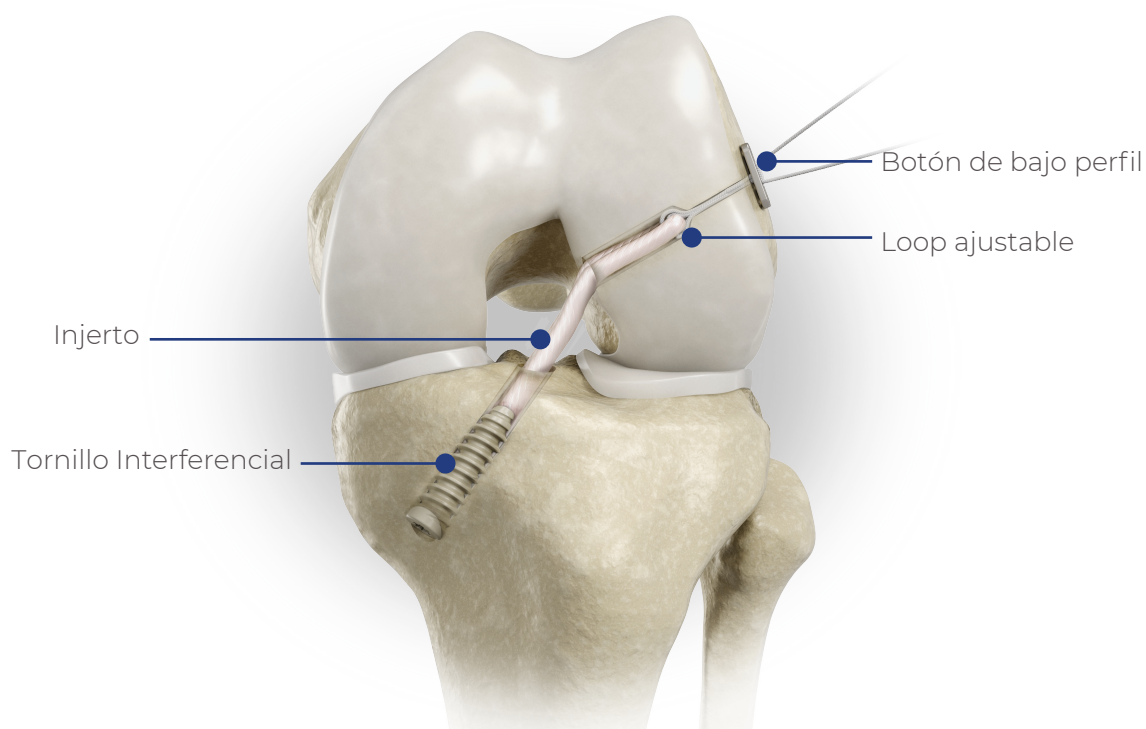

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

IMPLANTE

Código	Descripción
FG-BF601000	Botón de titanio con loop ajustable TenZ.

INSTRUMENTAL ASOCIADO

Código	Descripción
FG-CN313040	Pin punta de espada de 4 mm con ojal abierto, estéril.
FG-CN313240	Pin punta de espada de 4 mm con ojal cerrado, estéril.
FG-IN501047	Fresa femoral canulada de 4,7 mm.
FG-CN305401	Pin guía de 2,4 mm punta broca con ojal.
FG-CN305402	Pin guía de 2,4 mm punta diamante con ojal.

Indicación de uso: El Botón de titanio con loop ajustable está destinado a ofrecer fijación mediante suspensión del injerto al hueso cortical, en la reconstrucción de los ligamentos cruzados anterior y posterior de la rodilla. En Ecuador: REGISTRO SANITARIO No. 16639-DME-0524.

La disponibilidad de los productos puede variar según el mercado y las aprobaciones regulatorias locales. Consulte con su representante para más información.

Promedon
Sports Medicine