

SelfPass

Control y simplicidad en
el pasaje de suturas



Promedon
Sports Medicine

SelfPass

de Hombro

SelfPass ofrece un pasaje de suturas rápido y seguro. Desarrollada en acero inoxidable, su punta de agarre dentado y profundidad de mordida permiten una firme sujeción del tejido. Su modo de funcionamiento brinda un paso fluido y eficiente de la sutura.

Eficiencia en un solo paso

Pasaje y recuperación de la sutura en una sola maniobra, precargada frontalmente.



2 Bajo perfil

Su vástago permite atravesar cánulas de 6 mm de diámetro.

3 Sujeción segura

Gracias a su diseño dentado y profundidad de mordida de 22 mm.

4 Compatibilidad con suturas

TapeFit Max y CordFit #2.

5 Ergonomía optimizada

Maniobrabilidad controlada gracias a su mecanismo de accionamiento intuitivo y morfología de agarre.




SelfPass

de Rodilla

SelfPass de Rodilla ofrece un pasaje de suturas preciso y controlado. Su diseño en acero inoxidable y de bajo perfil, junto a su sistema de aguja optimizado permiten obtener un punto de sutura confiable, incluso en zonas de difícil acceso, manteniendo la seguridad de las estructuras articulares.

1 Acceso optimizado para espacios reducidos

Su punta está diseñada específicamente para alcanzar las zonas más estrechas del compartimiento articular.

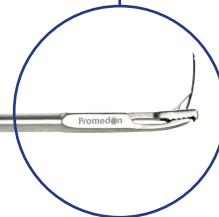


2



Aguja con punta de nitinol

Combina flexibilidad y resistencia, permitiendo un pasaje suave y controlado a través del tejido meniscal.

3

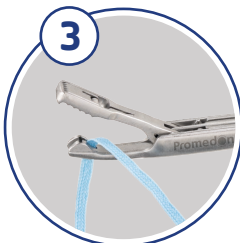

Muesca cónica de fondo que permite retener suturas

CordFit #2, CordFit #2-0 y TapeFit de 1,5 mm.

4

Agarre ergonómico

Cuenta con una morfología ergonómica e intuitiva para mayor precisión.



INFORMACIÓN DE PRODUCTO

INSTRUMENTALES

Código	Descripción
FG-IN096000	Pinza SelfPass.
FG-CN200901	Aguja para pinza SelfPass, estéril.
FG-IN590000	Pinza SelfPass de rodilla.
FG-CN305901	Aguja para pinza SelfPass de rodilla, estéril.

BRO-0008(04) / SEP-2026

Instrumentales no estériles. Indicación de uso: Los instrumentales no estériles, se indican para procedimientos quirúrgicos artroscópicos, cirugías ortopédicas mínimamente invasivas y/o cirugías ortopédicas abiertas de hombro, rodilla, pie y tobillo. REGISTRO SANITARIO No. 17532-DME-1124.

La disponibilidad de los productos puede variar según el mercado y las aprobaciones regulatorias locales. Consulte con su representante para más información.

Promedon
Sports Medicine