


SpinFit PK *Tenodesis*

Precisión y confiabilidad
en reparaciones tendinosas

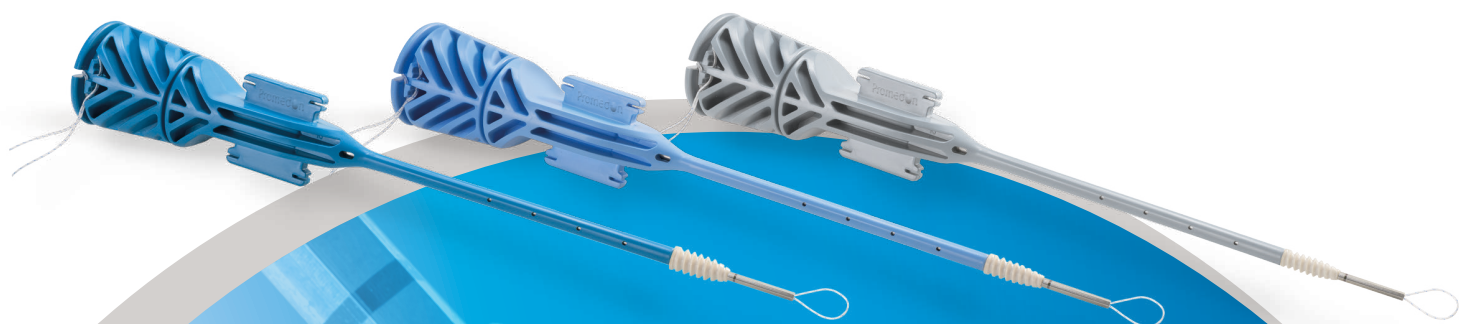


Promedon
Sports Medicine

SpinFit PK *Tenodesis*

El dispositivo **SpinFit PK *Tenodesis*** está diseñado para la reposición y refijación de tendones mediante una técnica inlay con túnel óseo ciego.


Se presenta en versiones desarrolladas en PEEK en **6 mm, 7 mm y 8 mm** de diámetro, diferenciadas a partir del color de los dispositivos de inserción.

Su mecanismo de implantación roscado y sencillo permite lograr una fijación robusta y confiable en menor tiempo.

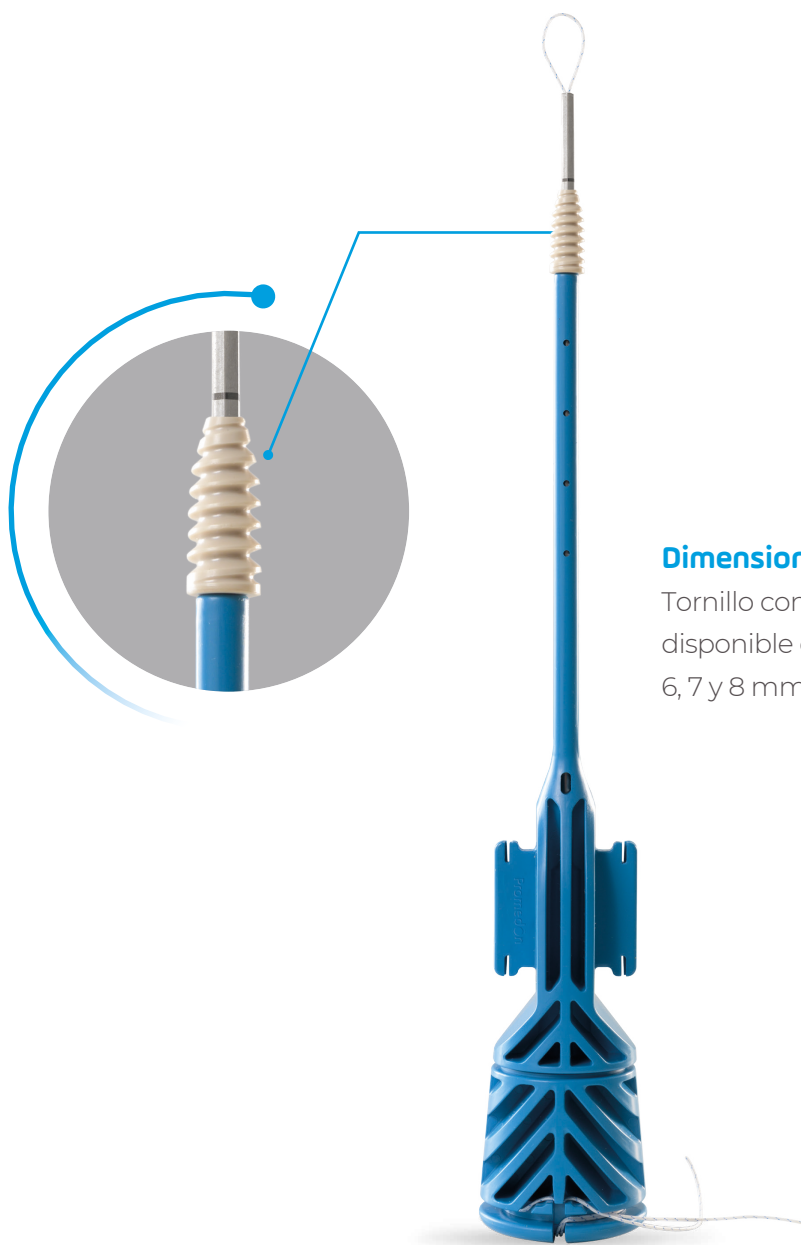

Dimensiones

Tornillo con alma hexagonal,
disponible en diámetros de
6, 7 y 8 mm.

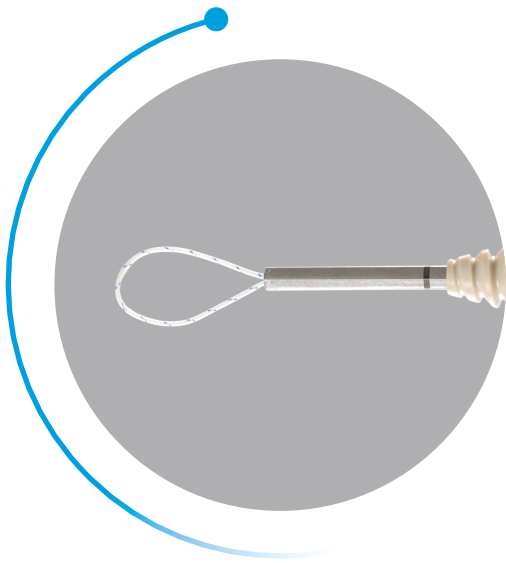


Ojal de sutura

Ojal con loop de sutura de UHMWPE tipo cuerda #2, le otorga versatilidad para adaptarse a distintas formas de tendón.



Accionamiento rápido y eficiente

Dispositivo de inserción completamente integrado, logrando un agarre ergonómico y firme.

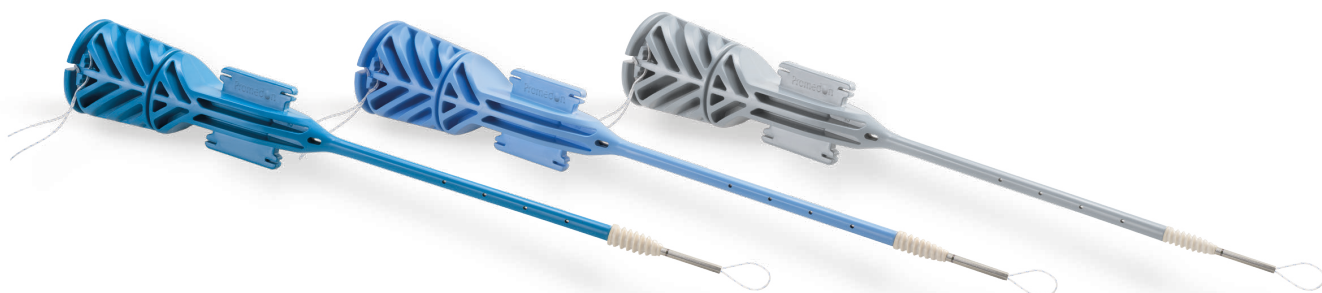



Encuentra más información sobre la implantación en el folleto de técnica quirúrgica de SpinFit PK **Tenodesis**

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

IMPLANTE

Código	Descripción
FG-TN120006	Dispositivo SpinFit PK Tenodesis de 6 x 19 mm, de PEEK, con ojal de sutura.
FG-TN120007	Dispositivo SpinFit PK Tenodesis de 7 x 19 mm, de PEEK, con ojal de sutura.
FG-TN120008	Dispositivo SpinFit PK Tenodesis de 8 x 19 mm, de PEEK, con ojal de sutura.

PRODUCTOS ASOCIADOS

Código	Descripción
FG-SU040102	Sutura CordFit Infinity #2 de UHMWPE, blanca-azul, en loop, con aguja recta y loop de nitinol.
FG-SU030102	Sutura CordFit with Tapered Needle #2 de UHMWPE, blanca-azul, con aguja 1/2 C.

INSTRUMENTAL ASOCIADO

Código	Descripción
FG-CN305401	Pin guía de 2,4 mm punta broca con ojal.
FG-IN500006	Broca tibial canulada de 6 mm.
FG-IN500007	Broca tibial canulada de 7 mm.
FG-IN500008	Broca tibial canulada de 8 mm.
FG-IN520020	Medidor de injerto acanalado.

Indicación de uso: Los anclajes de PEEK para tenodesis se indican para la fijación de tejidos blandos, incluidos ligamentos y tendones, al hueso. Están diseñados para ser empleados en hombro, rodilla y tobillo. REGISTRO SANITARIO No. 18096-DME-0225.

La disponibilidad de los productos puede variar según el mercado y las aprobaciones regulatorias locales. Consulte con su representante para más información.

Promedon
Sports Medicine