


# Knotix

**La solución completa**  
para las reparaciones con nudos

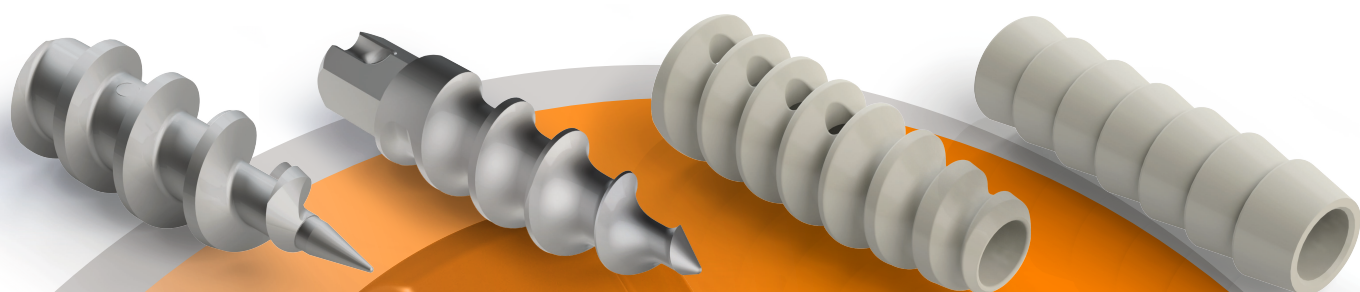

**Promedon**  
Sports Medicine

# Knotix Ti

Ancla roscada de titanio de 5,5 mm con nudos.

## Seguridad en la implantación

Marca láser para identificar la orientación del ojal y la profundidad de la implantación adecuada.



## Fácil manipulación

La hendidura en V posibilita un desacople diferenciado de los hilos de sutura.


## Sujeción segura del tejido

Precargada con dos suturas CordFit #2 azul y blanca-azul.



## Dimensiones

5,5 mm de diámetro por 16,3 mm de longitud.

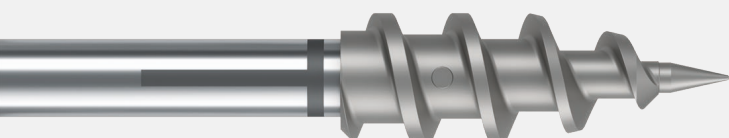

## Menos pasos

Permite sortear el uso de punzones en la preimplantación gracias a su diseño y fabricación en titanio de grado 23 de alta resistencia.

## Fijación mejorada

Espira de recorrido completo con ojal interno, ampliando la superficie de contacto con el tejido óseo.

# Knotix Ti 2.8

Ancla roscada de titanio de 2,8 mm con nudos.

## Implantación controlada

Compatible con la guía de implantación de 3,2 mm.

## Seguridad en la implantación

Marca láser para identificar la orientación del ojal y la profundidad de la implantación adecuada.

## Sujeción segura del tejido

Precargada con sutura CordFit #2 blanca-azul.

## Dimensiones

2,8 mm de diámetro por 11,6 mm de longitud.

## Menos etapas

Permite sortear el uso de brocas en la preimplantación.

## Ojal de baja fricción

Atenúa el rozamiento entre la sutura y el ancla garantizando un punto de anclaje seguro.

## Alta resistencia

El titanio grado 23 asegura una óptima performance biomecánica del implante.



# Knotix PK

Ancla roscada de PEEK de 5,5 mm con nudos.

## Seguridad en la implantación

Marca láser para identificar la orientación del ojal y la profundidad de la implantación adecuada.



## Fácil manipulación

La hendidura en V posibilita un desacople diferenciado de los hilos de sutura.

## Sujeción segura del tejido

Precargada con dos suturas CordFit #2 azul y blanca-azul.



## Dimensiones

5,5 mm de diámetro por 14,7 mm de longitud.

## Microperforaciones


Facilitan el proceso de osteointegración.

## Ojal de baja fricción

Permite contar con una espira completa que aumenta la superficie de contacto con el tejido óseo.

## Resistencia y elasticidad

El módulo de elasticidad del PEEK, similar al del tejido óseo, posibilita un mejor desempeño biomecánico.

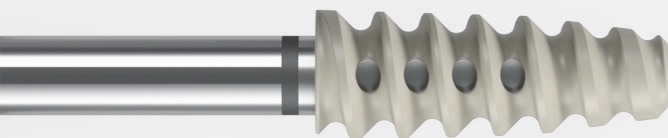

# Knotix SPD PK

Ancla impactada de PEEK de 3,0 mm con nudos.



## Implantación controlada

Compatible con la guía de implantación de 3,2 mm.

## Seguridad en la implantación

Marca láser para identificar la orientación del ojal y la profundidad de la implantación adecuada.

## Fácil manipulación

La hendidura en V posibilita un desacople diferenciado de los hilos de sutura.

## Sujeción segura del tejido

Precargada con dos suturas CordFit #2 blanca-azul.

## Dimensiones

3,0 mm de diámetro por 12,2 mm de longitud.

## Ojal interno de sutura


Mínima fricción entre el ojal y las suturas CordFit #2.

## Resistencia y elasticidad

El módulo de elasticidad del PEEK, similar el del tejido óseo, posibilita un mejor desempeño biomecánico.

## Ojal de baja fricción

Las espigas pronunciadas garantizan un bloqueo seguro del ancla implantada en el tejido óseo.

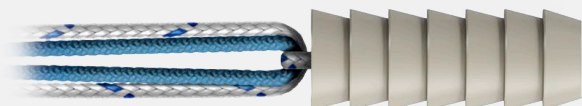

# INFORMACIÓN DE PRODUCTO

## IMPLANTE

| Código      | Descripción                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| FG-AN111255 | Ancla Knotix Ti de 5,5 mm x 16,3 mm con dos suturas CordFit #2 (azul y blanca-azul).     |
| FG-AN111728 | Ancla Knotix Ti 2,8 de 2,8 mm x 11,6 mm con una sutura CordFit #2 (blanca-azul).         |
| FG-AN112255 | Ancla Knotix PK de 5,5 mm x 14,7 mm con dos suturas CordFit #2 (azul y blanca-azul).     |
| FG-AN122230 | Ancla Knotix SPD PK de 3,0 mm x 12,2 mm con dos suturas CordFit #2 (azul y blanca-azul). |

## PRODUCTOS ASOCIADOS

| Código      | Descripción                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| FG-CN910670 | Cánula rígida roscada de 6 mm x 70 mm con obturador descartable. |
| FG-CN910690 | Cánula rígida roscada de 6 mm x 90 mm con obturador descartable. |
| FG-CN910870 | Cánula rígida roscada de 8 mm x 70 mm con obturador descartable. |
| FG-CN910890 | Cánula rígida roscada de 8 mm x 90 mm con obturador descartable. |

## INSTRUMENTAL ASOCIADO

| Código      | Descripción                                       |
|-------------|---------------------------------------------------|
| FG-IN001047 | Punzón para Knotix de 5,5 mm y SpinFit de 4,7 mm. |
| FG-IN001155 | Punzón roscado para Knotix de 5,5 mm.             |
| FG-IN081047 | Broca para Knotix de 5,5 mm y SpinFit de 4,7 mm.  |
| FG-IN013000 | Guía de implantación de 3,2 mm.                   |
| FG-IN082030 | Broca para Knotix SPD de 3,0 mm.                  |

Indicación de uso: se indican para la fijación de tejidos blandos al hueso.  
En Ecuador: REGISTRO SANITARIO No. 16687-DME-0524 (Anclas de PEEK).  
REGISTRO SANITARIO No. 16965-DME-0724 (Anclas de titanio).

La disponibilidad de los productos puede variar según el mercado y las aprobaciones regulatorias locales. Consulte con su representante para más información.

**Promedon**  
Sports Medicine