


Knotix

A solução completa
para reparos com nó

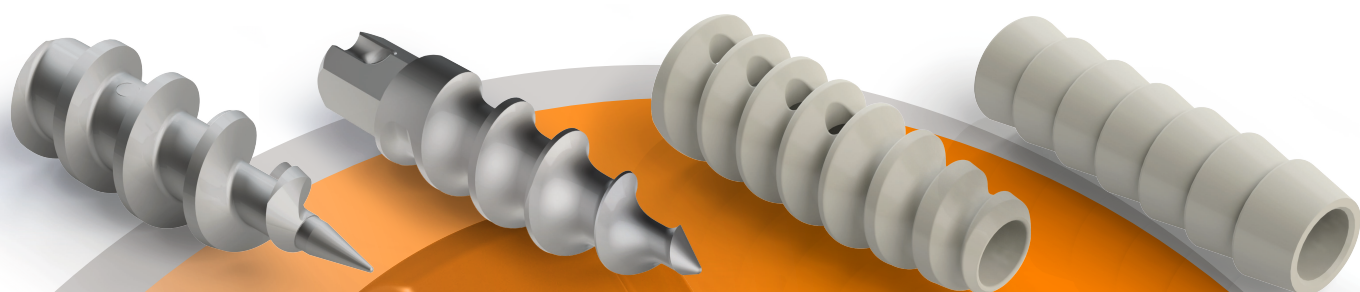

Promedon
Sports Medicine

Knotix Ti

Âncora rosqueada de titânio 5,5 mm com nós.

Segurança na implantação

Marcação a laser para facilitar a identificação da orientação do orifício de passagem da sutura e da profundidade adequada de implantação.

Fácil manuseio

A fenda em V permite a separação individual dos fios de sutura.

Fixação segura do tecido

Pré-carregada com duas suturas CordFit #2, nas cores azul e branco/azul.

Dimensões



5,5 mm de diâmetro por 16,3 mm de comprimento.

Menos etapas

Dispensa o uso de punções na pré-implantação graças ao seu design e à fabricação em titânio grau 23 de alta resistência.

Fixação aprimorada

Rosca de comprimento total com orifício interno, ampliando a superfície de contato com o tecido ósseo.

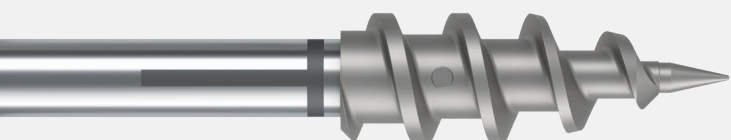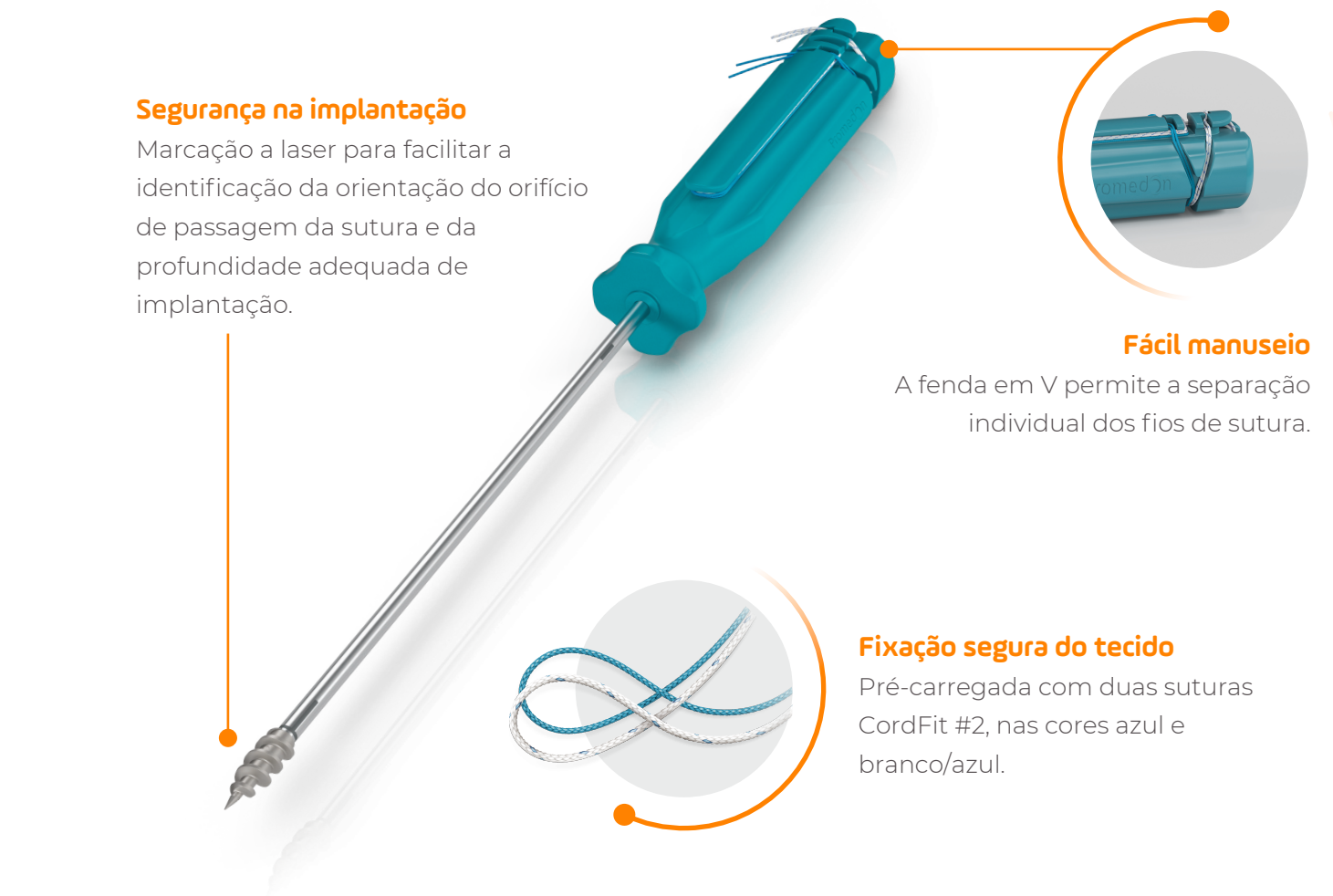

Knotix Ti 2.8

Âncora rosqueada de titânio 2,8 mm com nós.

Implantação controlada

Compatível com o guia de implantação de 3,2 mm.

Segurança na implantação

Marcação a laser para facilitar a identificação da orientação do orifício de passagem da sutura e da profundidade adequada de implantação.

Fixação segura do tecido

Pré-carregada com sutura CordFit #2 branca/azul.

Dimensões

2,8 mm de diâmetro por 11,6 mm de comprimento.

Pequenos passos


Permite a prevenção do uso de brocas em pré-implantação.

Orifício de baixa fricção

Reduz o atrito entre a sutura e a âncora, proporcionando um ponto de ancoragem seguro.

Alta resistência

O titânio grau 23 assegura um ótimo desempenho biomecânico do implante.

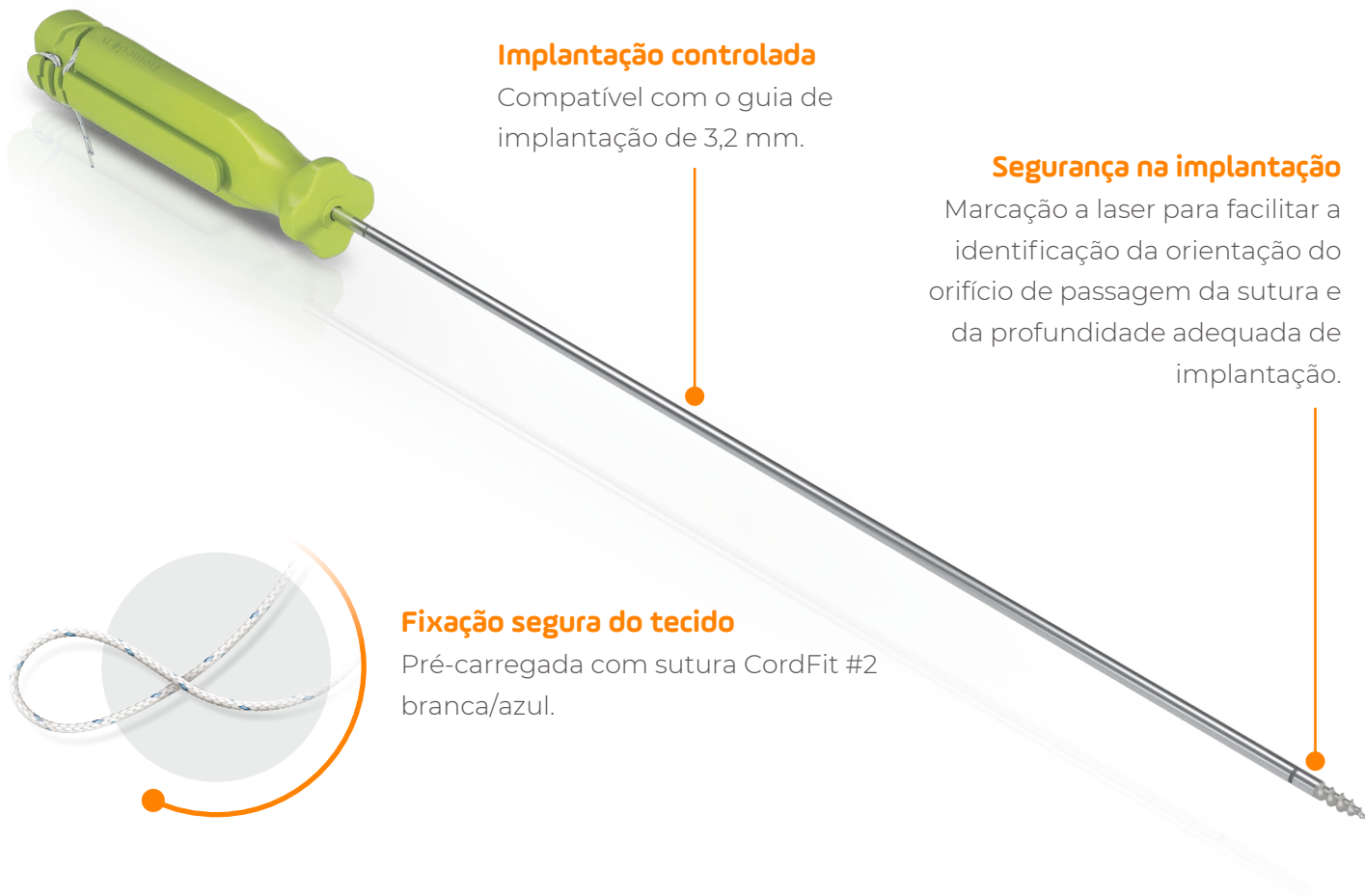

Knotix PK

Âncora rosqueada de PEEK de 5,5 mm com nós.

Segurança na implantação

Marcação a laser para facilitar a identificação da orientação do orifício de passagem da sutura e da profundidade adequada de implantação.

Fácil manuseio

A fenda em V permite a separação individual dos fios de sutura.

Fixação segura do tecido

Pré-carregada com duas suturas CordFit #2, nas cores azul e branco/azul.

Dimensões

5,5 mm de diâmetro por 14,7 mm de comprimento.

Microperfurações

Favorecem o processo de osteointegração.

Orifício de baixa fricção

Permite uma rosca completa, ampliando a superfície de contato com o tecido ósseo.

Resistência e elasticidade

O módulo de elasticidade de PEEK, semelhante ao tecido ósseo, proporciona melhor desempenho biomecânico.



Knotix SPD PK

Âncora impactada de PEEK de 3,0 mm com nós.



Implantação controlada

Compatível com o guia de implantação de 3,2 mm.

Segurança na implantação


Marcação a laser para facilitar a identificação da orientação do orifício de passagem da sutura e da profundidade adequada de implantação.

Fácil manuseio

A fenda em V permite a separação individual dos fios de sutura.

Fixação segura do tecido

Pré-carregada com duas suturas CordFit #2, branca/azul.

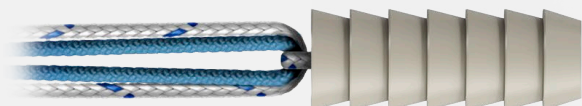

Orifício interno de sutura

Minimiza o atrito entre o orifício e as suturas CordFit #2.

Dimensões

3,0 mm de diâmetro por 12,2 mm de comprimento.

Fixação segura

As projeções salientes proporcionam fixação segura da âncora no tecido ósseo.

Resistência e elasticidade

O módulo de elasticidade de PEEK, semelhante ao tecido ósseo, proporciona melhor desempenho biomecânico.

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

IMPLANTE

Código	Descrição
FG-AN111255	Âncora Knotix Ti de 5,5 mm x 16,3 mm com duas suturas CordFit #2 (azul e branco-azul).
FG-AN111728	Âncora Knotix Ti 2,8 de 2,8 mm x 11,6 mm com uma sutura CordFit #2 (branco-azul).
FG-AN112255	Âncora Knotix PK de 5,5 mm x 14,7 mm com duas suturas CordFit #2 (azul e branco-azul).
FG-AN122230	Âncora Knotix SPD PK de 3,0 mm x 12,2 mm com duas suturas CordFit #2 (azul e branco-azul).

PRODUTOS RELACIONADOS

Código	Descrição
FG-CN910670	Cânula rígida com rosca de 6 mm x 70 mm com obturador descartável.
FG-CN910690	Cânula rígida com rosca de 6 mm x 90 mm com obturador descartável.
FG-CN910870	Cânula rígida com rosca de 8 mm x 70 mm com obturador descartável.
FG-CN910890	Cânula rígida com rosca de 8 mm x 90 mm com obturador descartável.

INSTRUMENTAL DEDICADO

Código	Descrição
FG-IN001047	Punção para Knotix de 5,5 mm e SpinFit de 4,7 mm.
FG-IN001155	Punção roscado para Knotix de 5,5 mm.
FG-IN081047	Broca para Knotix de 5,5 mm e SpinFit de 4,7 mm.
FG-IN013000	Guia de implantação de 3,2 mm.
FG-IN082030	Broca para Knotix SPD de 3,0 mm.

ANVISA N° 10306840204 (Âncoras de PEEK)
ANVISA N° 10306840205 (Âncora de titânio Knotix Ti)

A disponibilidade dos produtos pode variar de acordo com o mercado e as aprovações regulatórias locais. Consulte seu representante para obter mais informações.

Promedon
Sports Medicine