


QuickFit PK

Precisão e confiabilidade
em reparação sem nós

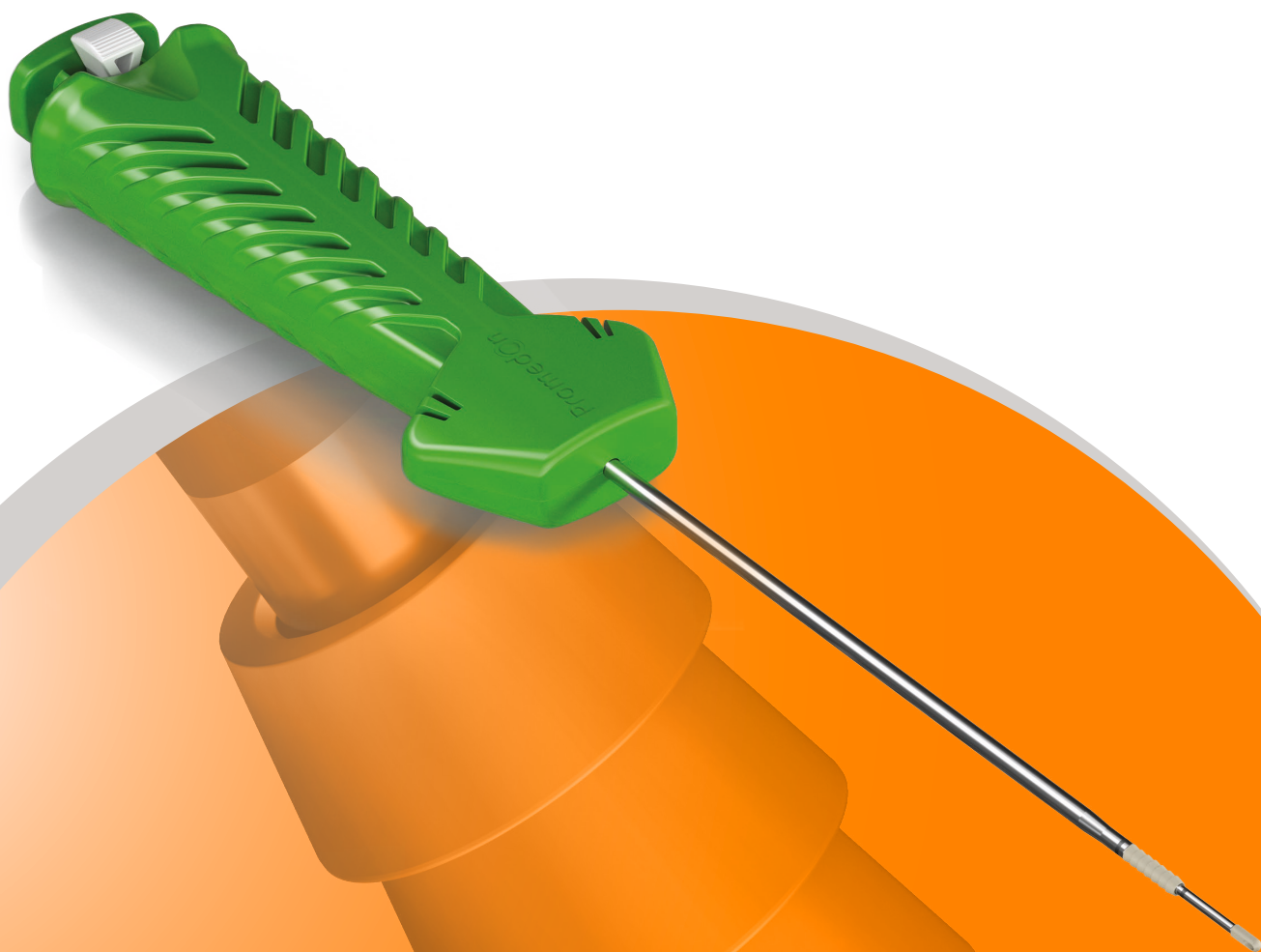

Promedon
Sports Medicine

QuickFit PK

Fixações seguras, máxima estabilidade.


A âncora impactada **QuickFit PK de 2,9 mm** foi desenvolvida para proporcionar fixação rápida e eficaz dos tecidos moles ao osso em técnicas de reparo sem nós.

Dimensões

2,9 mm de diâmetro
por 15,5 mm de comprimento.

Implantação eficaz

Suas linhas a laser identificam a profundidade correta de implantação.

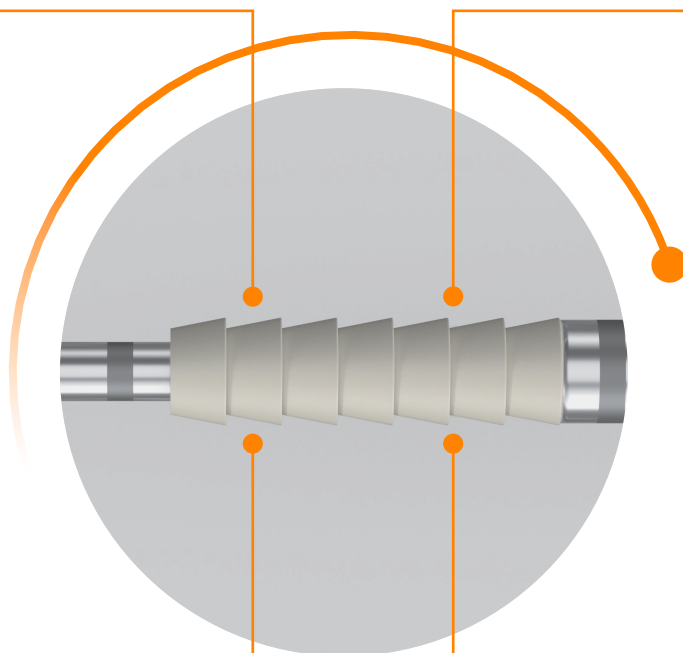

Desenvolvida em peek

Módulo de elasticidade semelhante ao tecido ósseo para um melhor desempenho biomecânico.

Farpas de fixação

Garantem um bloqueio seguro do implante no tecido ósseo.

Design inovador para uma performance eficiente.




Zona de impacto de alta resistência com clipe de segurança de desacoplamento rápido.

Ampla zona de empunhadura para maior precisão e controle durante a implantação.

Zona de retenção de suturas para bloquear a tensão da sutura na etapa de pré-implantação.

Compatível com sutura tipo fita de 1,5 mm para aumentar a superfície de contato com o labrum na reparação.

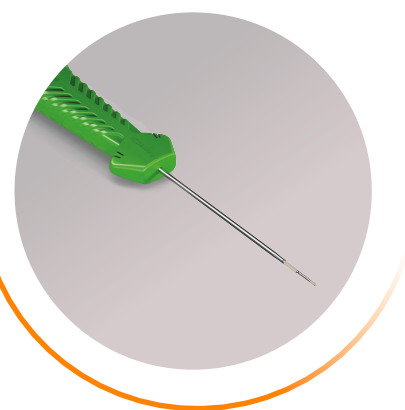

Orifício distal para o correto travamento da sutura.

ANCORAGEM OTIMIZADA

-  Fixação segura.
-  Design ergonômico.
-  Inserção fácil e rápida.
-  Melhora a interação com o tecido mole graças à sua compatibilidade com sutura tipo fita de 1,5 mm.



INFORMAÇÕES DO PRODUTO

IMPLANTE

Código	Descrição
FG-AN022029	Âncora QuickFit PK de 2,9 mm x 15,5 mm.

PRODUTOS RELACIONADOS

Código	Descrição
FG-SU711115	TapeFit tipo fita 1,5 mm de UHMWPE, azul, 38" (96 cm).
FG-CN910670	Cânula rígida com rosca de 6 mm x 70 mm com obturador descartável.
FG-CN910690	Cânula rígida com rosca de 6 mm x 90 mm com obturador descartável.
FG-CN910870	Cânula rígida com rosca de 8 mm x 70 mm com obturador descartável.
FG-CN910890	Cânula rígida com rosca de 8 mm x 90 mm com obturador descartável.

INSTRUMENTAL DEDICADO

Código	Descrição
FG-IN082029	Broca para QuickFit de 2,9 mm.
FG-IN013000	Guia de implantação de 3,2 mm.

ANVISA N° 10306840204

A disponibilidade dos produtos pode variar de acordo com o mercado e as aprovações regulatórias locais. Consulte seu representante para obter mais informações.

Promedon
Sports Medicine