

SpinFit PK

Precisão e confiabilidade
em reparação sem nós



Promedon
Sports Medicine

SpinFit PK

Fixação otimizada e desempenho superior.


A âncora rosqueada **SpinFit PK de 4,7 mm** foi desenvolvida para otimizar a fixação sem nós de tecidos moles ao osso.

Dimensões

4,7 mm de diâmetro
por 19,1 mm de comprimento.

Microperfurações

Favorecem o processo
de osteointegração.

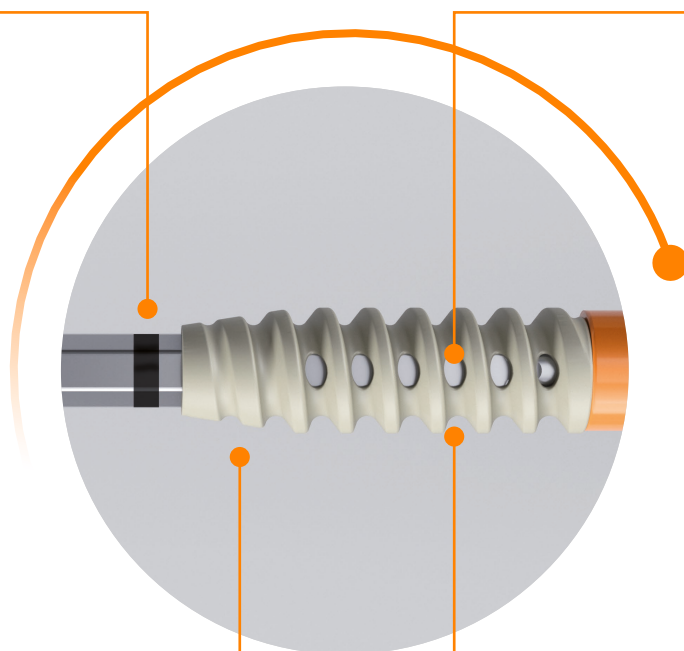


Desenvolvida em PEEK

Seu módulo de elasticidade, semelhante ao do tecido ósseo, proporciona melhor desempenho biomecânico.


Rosca helicoidal completa

Proporciona maior superfície de contato com o tecido ósseo.


Máxima precisão na abordagem e na colocação

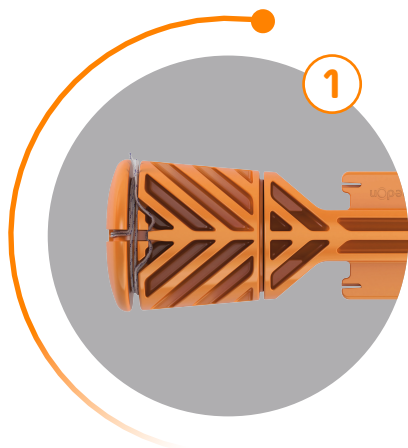

Ampla área de empunhadura ao longo do cabo, proporcionando maior precisão durante a implantação.

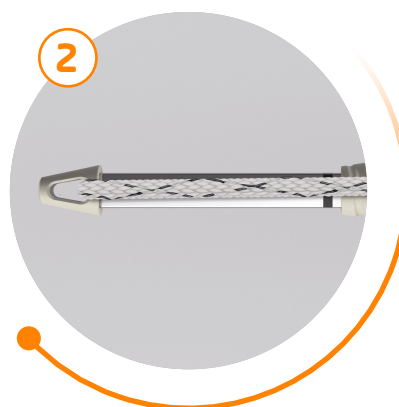

Fixação segura da sutura graças ao orifício localizado na extremidade distal.

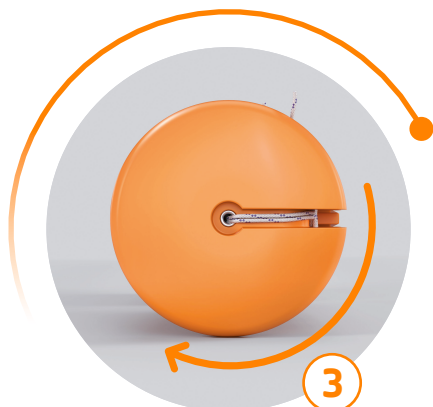

Mecanismo de acionamento no cabo que proporciona um avanço preciso e uniforme da âncora.

Ampla superfície de contato com o tecido proporcionada pela sutura TapeFit Max de 2 mm, reduzindo o risco de lesão tecidual por cisalhamento.



REPARAÇÕES SIMPLES E SEGURAS, EM MENOS ETAPAS

- Design ergonômico.
- Qualidade de fixação superior.
- Inserção fácil e rápida.
- Disponível na versão com sutura pré-carregada TapeFit Max e na versão sem sutura.



INFORMAÇÕES DO PRODUTO

IMPLANTE

Código	Descrição
FG-AN012047	Âncora SpinFit PK de 4,7 mm x 19,1 mm sem sutura.
FG-AN012147	Âncora SpinFit PK de 4,7 mm x 19,1 mm com sutura TapeFit Max (branco-preto).

PRODUTOS RELACIONADOS

Código	Descrição
FG-SU510120	Sutura TapeFit Max, de 2 mm de UHMWPE e PP, branco/azul, 30" (76 cm).
FG-CN910670	Cânula rígida com rosca de 6 mm x 70 mm com obturador descartável.
FG-CN910690	Cânula rígida com rosca de 6 mm x 90 mm com obturador descartável.
FG-CN910870	Cânula rígida com rosca de 8 mm x 70 mm com obturador descartável.
FG-CN910890	Cânula rígida com rosca de 8 mm x 90 mm com obturador descartável.

INSTRUMENTAL DEDICADO

Código	Descrição
FG-IN081047	Broca para Knotix de 5,5 mm e SpinFit de 4,7 mm.
FG-IN001047	Punção para Knotix de 5,5 mm e SpinFit de 4,7 mm.
FG-IN001147	Punção rosqueada para SpinFit de 4,7 mm.

ANVISA N° 10306840204 (Âncoras de PEEK)

A disponibilidade dos produtos pode variar de acordo com o mercado e as aprovações regulatórias locais. Consulte seu representante para obter mais informações.

Promedon
Sports Medicine