

Spirom

A solução completa para
reconstruções e reparos dos
tecidos do joelho




Promedon
Sports Medicine

Spirom PK


Fixação sólida e desempenho eficaz.

-  Fabricado em PEEK, material bioinerte caracterizado por sua resistência e módulo de elasticidade semelhante ao osso cortical. Além disso, não interfere nos estudos de diagnóstico por imagem.
-  **Spirom PK** desenvolvido para todos os tipos de enxertos.
-  A conicidade do corpo facilita a inserção no osso.
-  Sua cabeça plana protege o enxerto e proporciona máxima fixação no túnel ósseo.

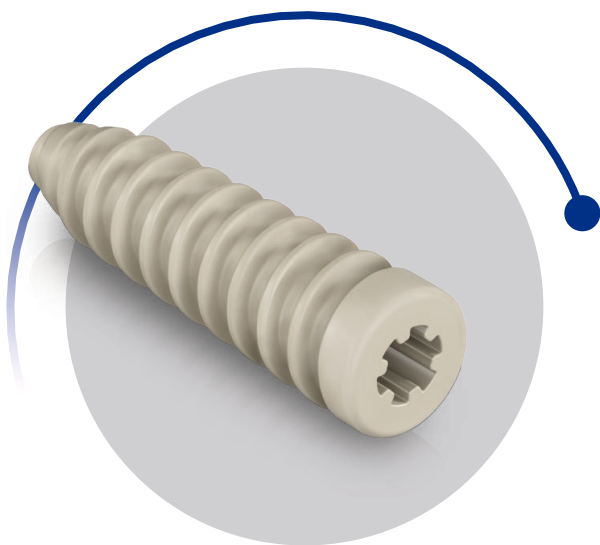


Disponível em diâmetros de 7 a 12 mm, em diferentes comprimentos.


Possui encaixe hexalobular que proporciona transmissão eficiente de torque entre a chave de inserção e o parafuso.

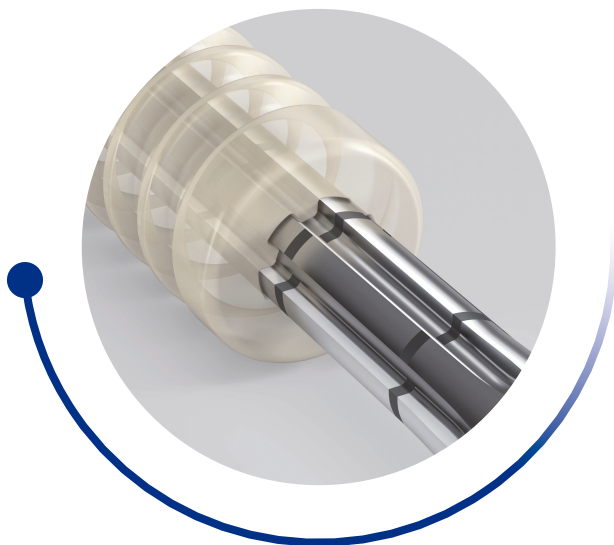

Spirom PK *Tenodesis*

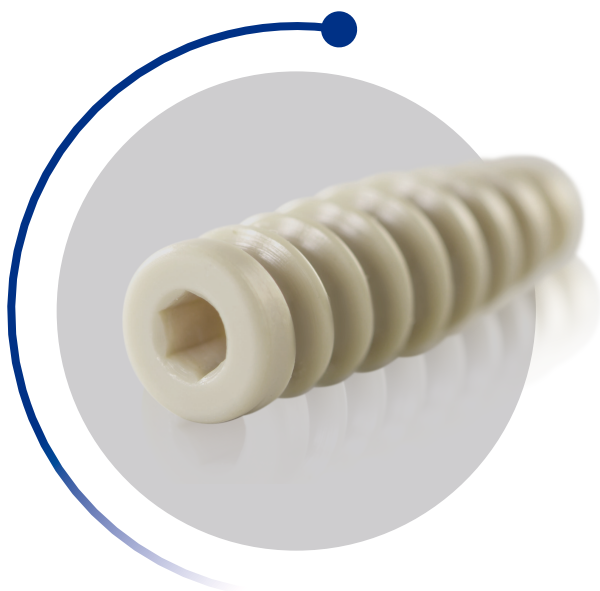

Disponível em diâmetro de 6 mm e comprimento de 19 mm. Possui núcleo hexagonal e foi desenvolvido para o reposicionamento e a refixação de tendões em reparos extracapsulares do joelho.

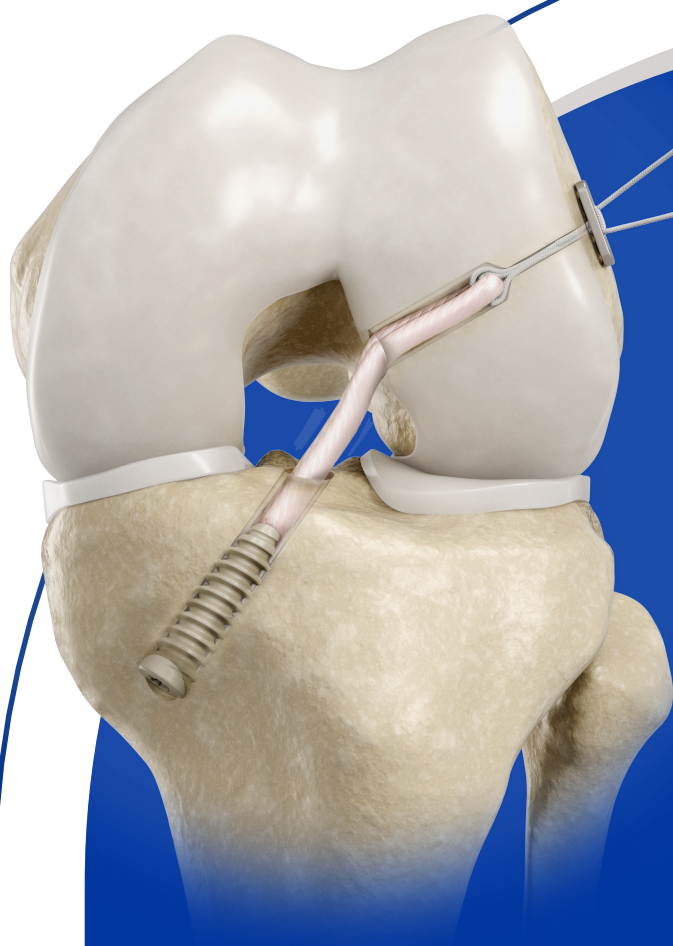

**Uma linha completa para
fixação interferencial do
joelho**

Spirom Ti / Ti FT / Ti BTB

Design otimizado para uma inserção rápida.

Spirom Ti



Spirom Ti FT




Spirom Ti BTB



Ø de 7 a 11 mm

Ø de 7 a 9 mm

-  Fabricados em titânio de grau médico.
-  Graças ao perfil rombo da rosca, os modelos **Spirom Ti** e **Spirom Ti FT** proporcionam fixação segura ao enxerto de tecido mole, preservando sua integridade.
-  O modelo **Spirom Ti FT** possui rosca completa, especialmente desenvolvida para fixação tibial, proporcionando melhor fixação na cortical óssea.
-  **Spirom Ti BTB** foi exclusivamente desenvolvido para a fixação de enxertos osso-tendão-osso. Possui um design de rosca cortante que facilita a inserção e a perfuração do tecido ósseo.

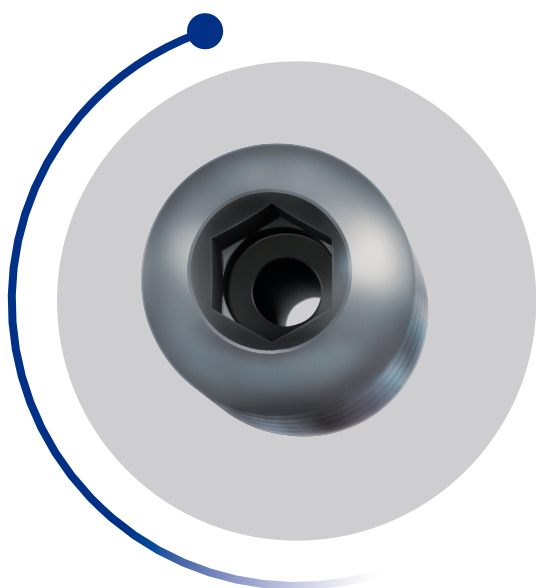

Encaixe hexagonal ideal entre o parafuso e a chave de inserção.

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

IMPLANTE TITÂNIO

Código	Descrição
FG-SC110725	Parafuso de interferência de titânio Spirom Ti de 07x25.
FG-SC110730	Parafuso de interferência de titânio Spirom Ti de 07x30.
FG-SC110825	Parafuso de interferência de titânio Spirom Ti de 08x25.
FG-SC110830	Parafuso de interferência de titânio Spirom Ti de 08x30.
FG-SC110925	Parafuso de interferência de titânio Spirom Ti de 09x25.
FG-SC110930	Parafuso de interferência de titânio Spirom Ti de 09x30.
FG-SC111025	Parafuso de interferência de titânio Spirom Ti de 10x25.
FG-SC111030	Parafuso de interferência de titânio Spirom Ti de 10x30.
FG-SC111125	Parafuso de interferência de titânio Spirom Ti de 11x25.
FG-SC111130	Parafuso de interferência de titânio Spirom Ti de 11x30.
FG-SC120720	Parafuso de interferência de titânio tendão-ósseo, Spirom Ti BTB de 07x20.
FG-SC120725	Parafuso de interferência de titânio tendão-ósseo, Spirom Ti BTB de 07x25.
FG-SC120820	Parafuso de interferência de titânio tendão-ósseo, Spirom Ti BTB de 08x20.
FG-SC120825	Parafuso de interferência de titânio tendão-ósseo, Spirom Ti BTB de 08x25.
FG-SC120920	Parafuso de interferência de titânio tendão-ósseo, Spirom Ti BTB de 09x20.
FG-SC120925	Parafuso de interferência de titânio com rosca completa, Spirom Ti BTB de 09x25.
FG-SC130725	Parafuso de interferência de titânio com rosca completa, Spirom Ti FT de 07x25.
FG-SC130730	Parafuso de interferência de titânio com rosca completa, Spirom Ti FT de 07x30.
FG-SC130825	Parafuso de interferência de titânio com rosca completa, Spirom Ti FT de 08x25.
FG-SC130830	Parafuso de interferência de titânio com rosca completa, Spirom Ti FT de 08x30.
FG-SC130925	Parafuso de interferência de titânio com rosca completa, Spirom Ti FT de 09x25.
FG-SC130930	Parafuso de interferência de titânio com rosca completa, Spirom Ti FT de 09x30.
FG-SC131025	Parafuso de interferência de titânio com rosca completa, Spirom Ti FT de 10x25.
FG-SC131030	Parafuso de interferência de titânio com rosca completa, Spirom Ti FT de 10x30.
FG-SC131125	Parafuso de interferência de titânio com rosca completa, Spirom Ti FT de 11x25.
FG-SC131130	Parafuso de interferência de titânio com rosca completa, Spirom Ti FT de 11x30.

INSTRUMENTAL DEDICADO TITÂNIO

Código	Descrição
FG-IN600000	Cabo com catraca e conexão Small Hudson.
FG-IN601100	Chave para parafuso de titânio.
FG-CN313120	Fio guia de nitinol com 2 mm.

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

IMPLANTE PEEK

Código	Descrição
FG-SC200723	Parafuso de interferência de PEEK Spirom PK de 07x23.
FG-SC200728	Parafuso de interferência de PEEK Spirom PK de 07x28.
FG-SC200823	Parafuso de interferência de PEEK Spirom PK de 08x23.
FG-SC200828	Parafuso de interferência de PEEK Spirom PK de 08x28.
FG-SC200923	Parafuso de interferência de PEEK Spirom PK de 09x23.
FG-SC200928	Parafuso de interferência de PEEK Spirom PK de 09x28.
FG-SC200935	Parafuso de interferência de PEEK Spirom PK de 09x35.
FG-SC201023	Parafuso de interferência de PEEK Spirom PK de 10x23.
FG-SC201028	Parafuso de interferência de PEEK Spirom PK de 10x28.
FG-SC201035	Parafuso de interferência de PEEK Spirom PK de 10x35.
FG-SC201128	Parafuso de interferência de PEEK Spirom PK de 11x28.
FG-SC201135	Parafuso de interferência de PEEK Spirom PK de 11x35.
FG-SC201228	Parafuso de interferência de PEEK Spirom PK de 12x28.
FG-SC201235	Parafuso de interferência de PEEK Spirom PK de 12x35.
FG-SC200619	Parafuso de PEEK Spirom PK Tenodesis de 6 x 19 mm.

INSTRUMENTAL DEDICADO PEEK

Código	Descrição
FG-IN600000	Cabo com conexão críquete e Small Hudson.
FG-IN601200	Chave para parafuso de peek e biocomposto.
FG-CN313111	Fio guia de nitinol com 1,1 mm.
FG-IN601010	Ponta para fácil inserção.
FG-IN601011	Ponta para fácil remoção.
FG-IN601206	Chave para parafuso de peek e biocomposto de 6 mm.

ANVISA Nº 10306840202 (Spirom Ti)
ANVISA Nº 10306840203 (Spirom PK)

A disponibilidade dos produtos pode variar de acordo com o mercado e as aprovações regulatórias locais. Consulte seu representante para obter mais informações.

Promedon
Sports Medicine