


Suturas Especiais

Precisão e alta resistência
em procedimentos ortopédicos

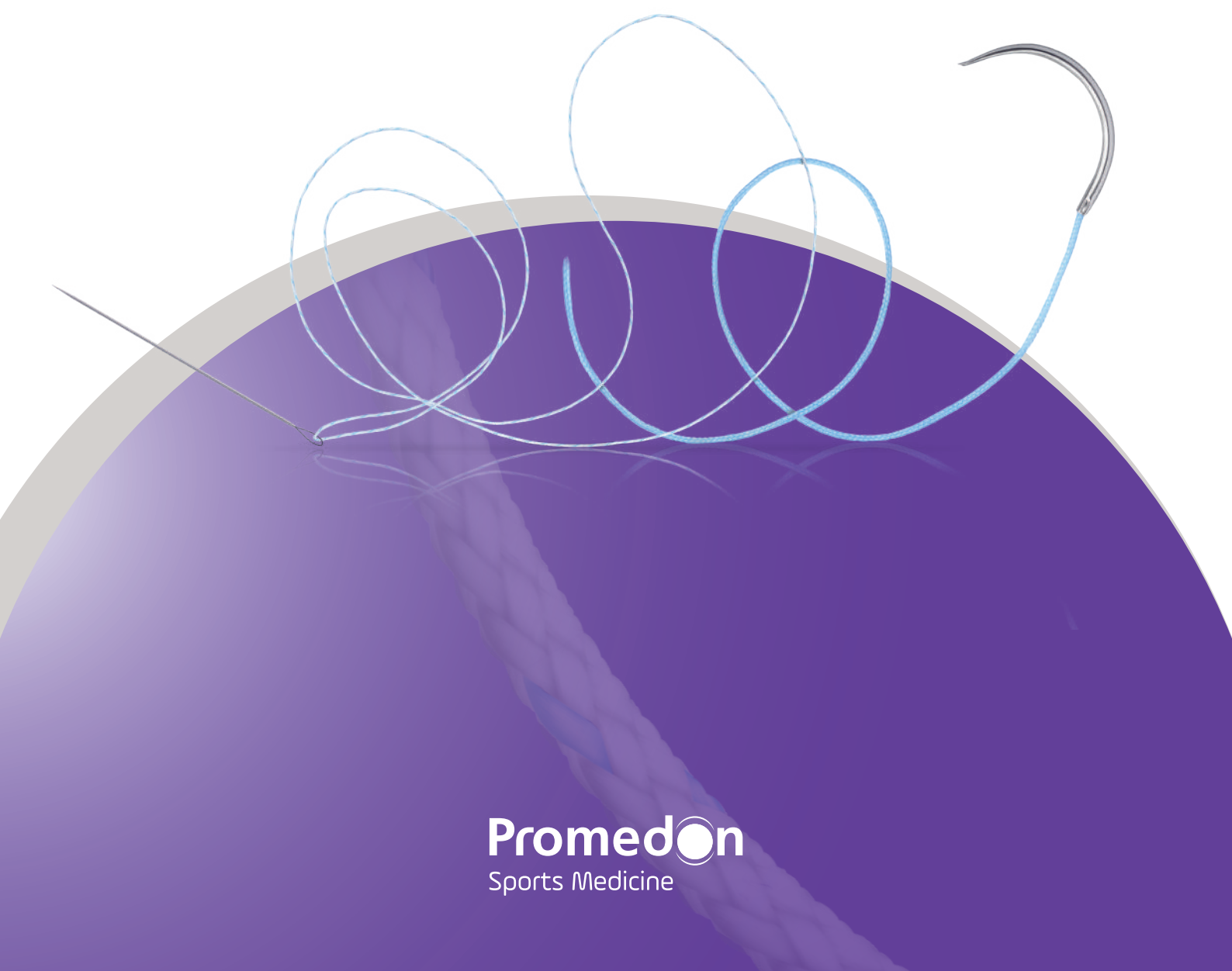

CordFit Meniscal Repair

Possui uma **sutura tipo fio #2-0 com duas agulhas retas**, desenvolvida para o reparo meniscal pela técnica inside-out, permitindo o acesso principalmente ao corno anterior e ao corpo do menisco.

- Disponível em cor azul.



Flexibilidade e resistência



As duas agulhas retas de 320 mm de comprimento e 0,73 mm de diâmetro são fabricadas em aço inoxidável e proporcionam alta flexibilidade. Além disso, o sistema apresenta uma fixação entre a agulha e a sutura de alta resistência, capaz de suportar cargas superiores a 20 N.¹



Passagem suave

As agulhas com ponta de diamante são projetadas para facilitar a perfuração controlada do menisco, minimizando danos ao tecido.

Seu revestimento siliconado proporciona uma passagem suave pelo tecido.

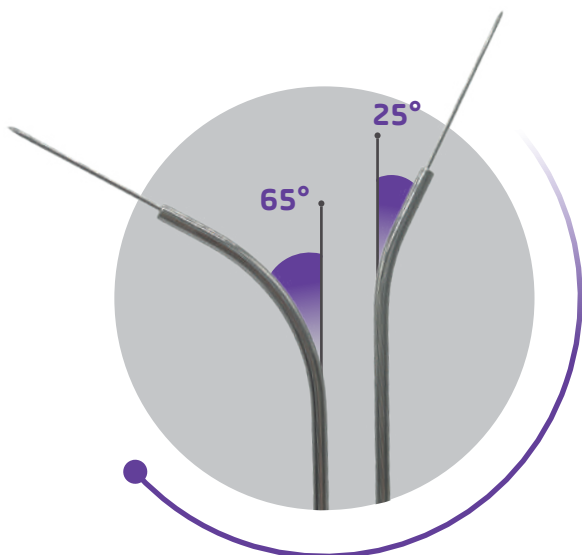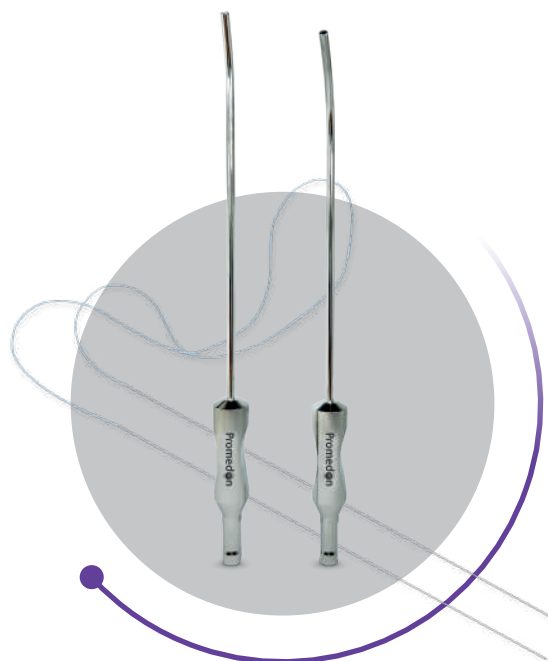

Instrumental associado

As agulhas são utilizadas com camisas meniscais disponíveis em duas angulações, 25° e 65°, que permitem direcionar sua passagem até as áreas a serem reparadas.

As camisas meniscais possuem pontas achatadas, projetadas para minimizar danos ao menisco durante o procedimento.

1. Definido por ensaios internos segundo US Pharmacopeia.

CordFit with Tapered Needle

Composta por uma **sutura tipo fio nº 2**, acoplada a uma agulha semicircular, a CordFit é indicada para a preparação de enxertos e a sutura de ligamentos e tendões em procedimentos ortopédicos.

- Disponível em cor azul.




Resistência

A fixação da agulha à sutura CordFit nº 2 com ponta cônica apresenta alta resistência mecânica, suportando cargas superiores a 24 N.¹



Fluidez e precisão

Fabricada em aço inoxidável, a agulha possui seção transversal circular, ponta cônica e revestimento siliconado, características que favorecem uma passagem suave e precisa através do tecido.

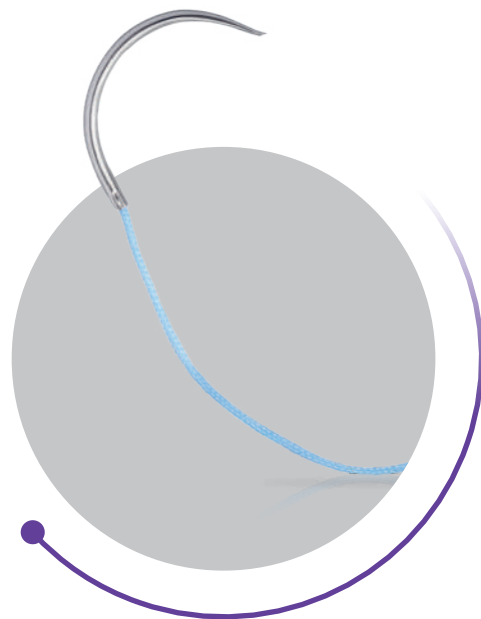

CordFit Infinity

Composta por uma **sutura em loop #2** e uma **agulha reta de aço inoxidável de 70 mm** de comprimento, desenvolvida para a preparação de diferentes tipos de enxertos em procedimentos ortopédicos.

- Disponível em branco-azul.




Resistência

A fixação da agulha à sutura suporta cargas de mais de 24 N. Além disso, a resistência do loop de sutura é superior a 372 N.²



Passagem segura

A agulha siliconada de seção circular permite uma passagem suave, evitando a distensão de tecidos.

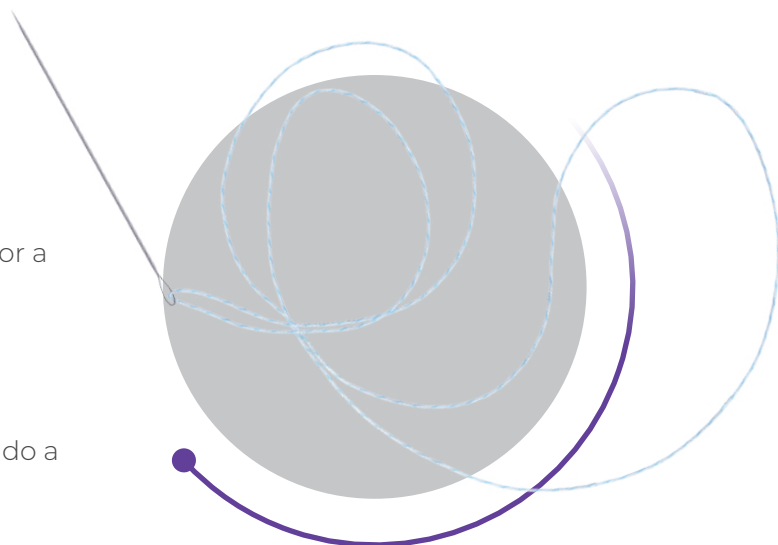

2. Definido por ensaios internos.

CordFit Stiff

A CordFit Stiff é uma sutura #2 com extremidade rígida e tubo protetor de polipropileno de 355 mm de comprimento. Desenvolvida para facilitar a recuperação e a passagem de suturas do interior da articulação para o exterior, através de túneis ósseos.

- Disponível em cor azul.





Extremidade rígida


Simplifica a passagem da sutura pelo tubo protetor.



Precisão e eficiência


Seu design facilita procedimentos como o reparo da raiz meniscal e a reconstrução dos ligamentos cruzados anterior (LCA) e posterior (LCP) pela técnica *all-inside*.

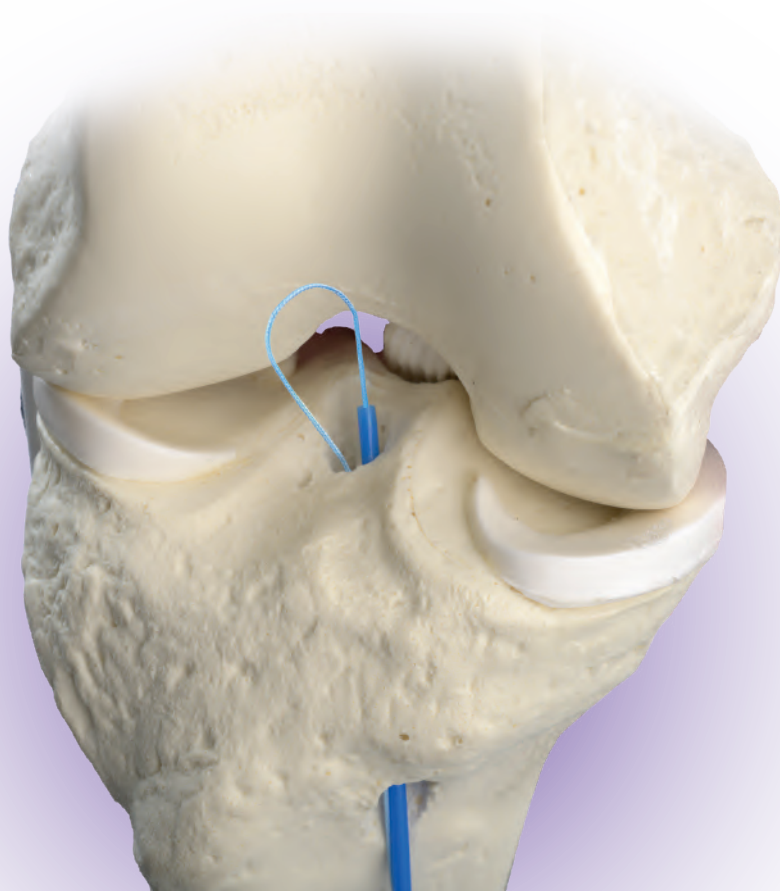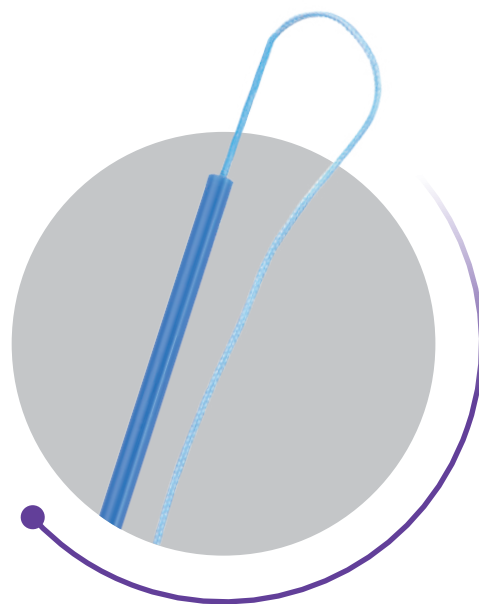

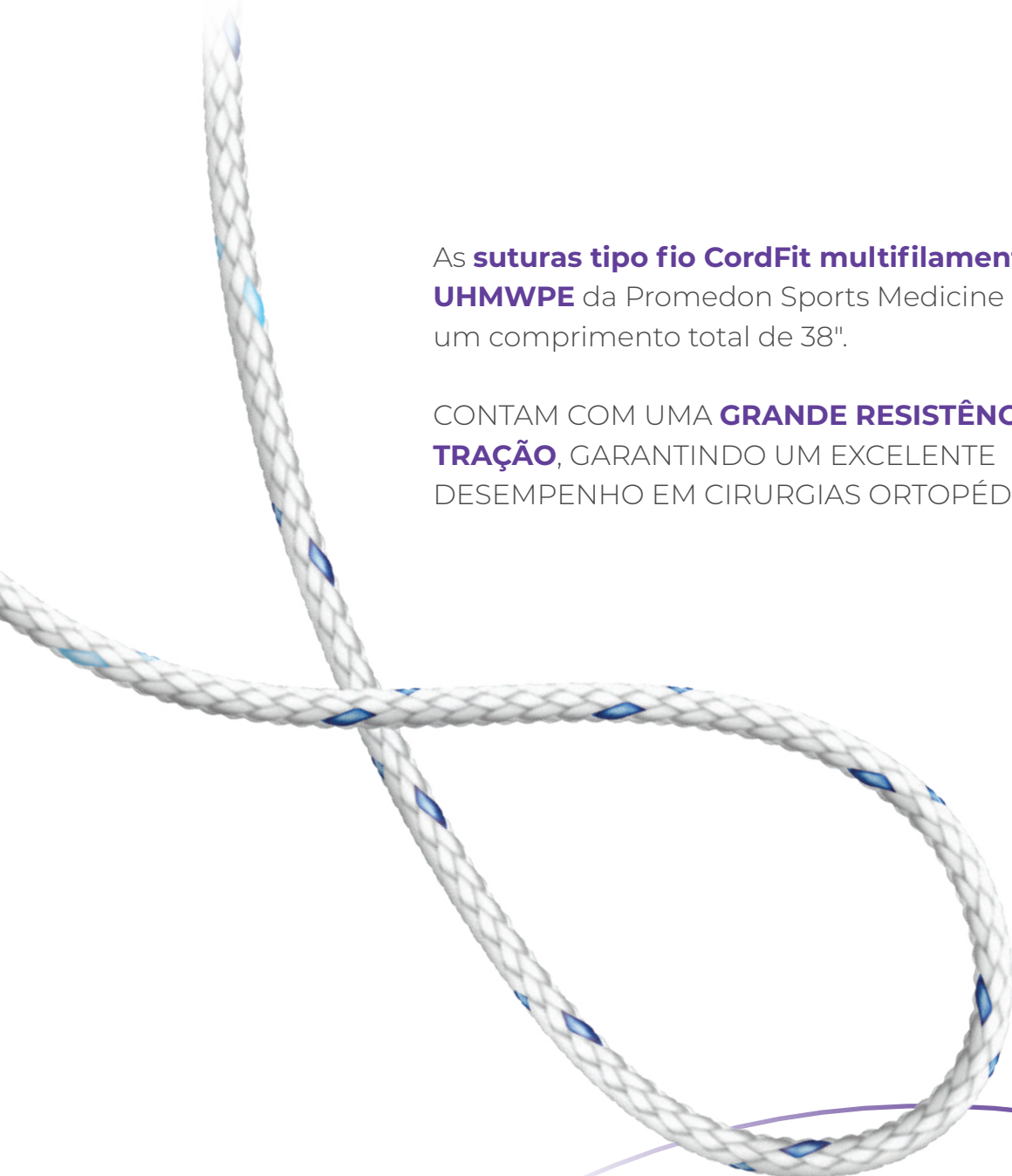

As **suturas tipo fio CordFit multifilamentar de UHMWPE** da Promedon Sports Medicine possuem um comprimento total de 38".

CONTAM COM UMA **GRANDE RESISTÊNCIA À TRAÇÃO**, GARANTINDO UM EXCELENTE DESEMPENHO EM CIRURGIAS ORTOPÉDICAS.

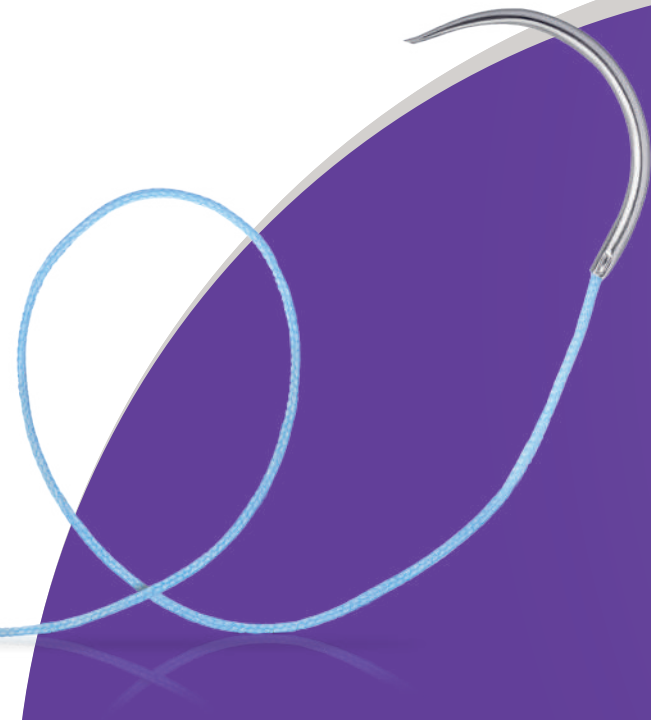

Todas as suturas são fabricadas com polietileno de ultra-alto peso molecular (UHMWPE) de grande resistência para proporcionar segurança nos procedimentos cirúrgicos.

INFORMAÇÃO DE PRODUTO

Código	Descrição
FG-SU061120	Sutura CordFit Meniscal Repair #2-0 de UHMWPE, azul, com duas agulhas.
FG-SU040102	Sutura CordFit Infinity #2 de UHMWPE, branca-azul, em loop com agulha reta.
FG-SU021102	Sutura CordFit Stiff #2 de UHMWPE, azul, com extremidade rígida.
FG-SU031102	Sutura CordFit with Tapered Needle #2 de UHMWPE, azul, com agulha 1/2 C.

INSTRUMENTAIS ASSOCIADOS

Código	Descrição
FG-IN590025	Camisa para reparação meniscal com ponta inclinada 25°.
FG-IN590065	Camisa para reparação meniscal com ponta inclinada 65°.
FG-IN593000	Protetor Poplíteo.

BRO-0028 (01) / OCT-2026