


TapeFit Max, TapeFit & CordFit

Família de suturas para
fixações de tecidos moles

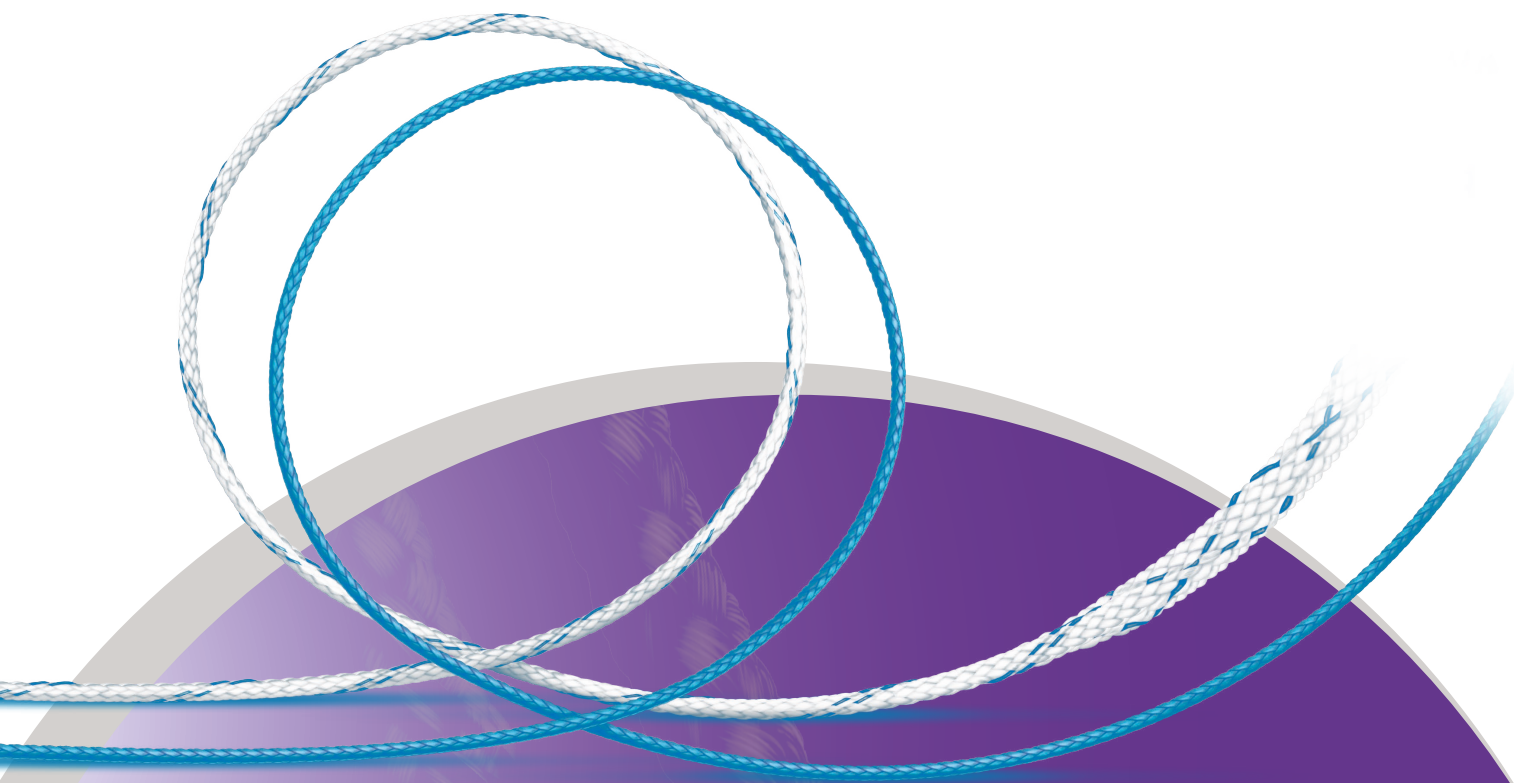

TapeFit 1,5 mm

Sutura multifilamentar com design em fita de alta resistência, desenvolvida para ampliar a superfície de contato e favorecer a distribuição das forças sobre o tecido.

- Disponível na cor azul.
- 100% UHMWPE.



Resistente: maior resistência na tração sem danificar o tecido.



Versátil: possibilita diferentes configurações de reparo, incluindo técnicas sem nós.



Compatível com a âncora QuickFit PK.

TapeFit Max 2 mm

Desenvolvida com geometria mista, composta por uma região central em fita de 2 mm e extremidades em fio #5

- Disponível nas cores branco e azul.
- UHMWPE + polipropileno.




Ampla superfície de contato: fita com 2 mm de largura para reparações sem nó.



Facilidade de manuseio: extremidades em fio #5 que facilitam a passagem através do tecido e do dispositivo.

TapeFit Max

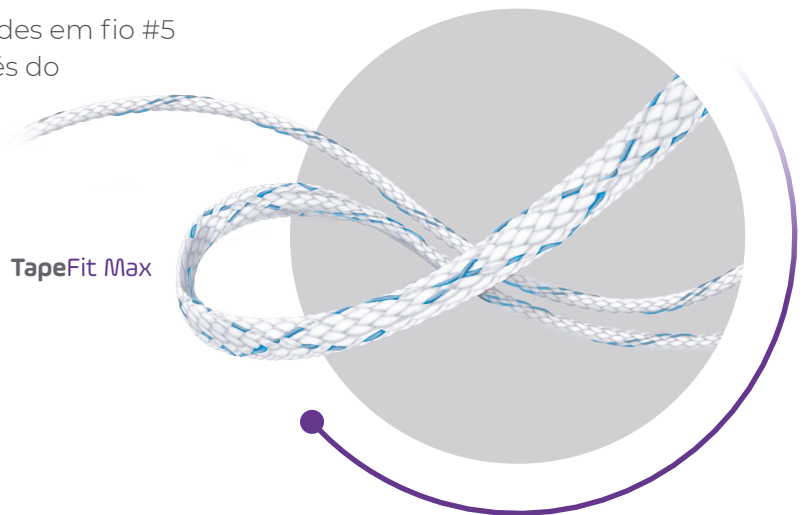

CordFit

As suturas CordFit são confeccionadas em UHMWPE com construção multifilamentar trançada, proporcionando resistência à tração e características de manuseio adequadas aos reparos de tecidos moles em procedimentos ortopédicos minimamente invasivos.

- Disponível nas cores azul e branco/azul.
- 100% UHMWPE.

CordFit #2



Resistência e baixo perfil:

A construção trançada sem núcleo proporciona resistência à tração e formação de nós de baixo perfil, que contribuem para melhor processo de cicatrização durante a recuperação.



Textura aprimorada:

Textura desenvolvida para favorecer o deslizamento da sutura e reduzir a abrasão sobre o tecido.

CordFit #2-0




Menor diâmetro e textura otimizada:

Seu menor diâmetro facilita a passagem e o manuseio da sutura em reparos de tecidos moles, incluindo procedimentos meniscais.



Design de alto contraste:

Disponível em cores que favorecem a visualização e a identificação da sutura durante procedimentos artroscópicos e minimamente invasivos.

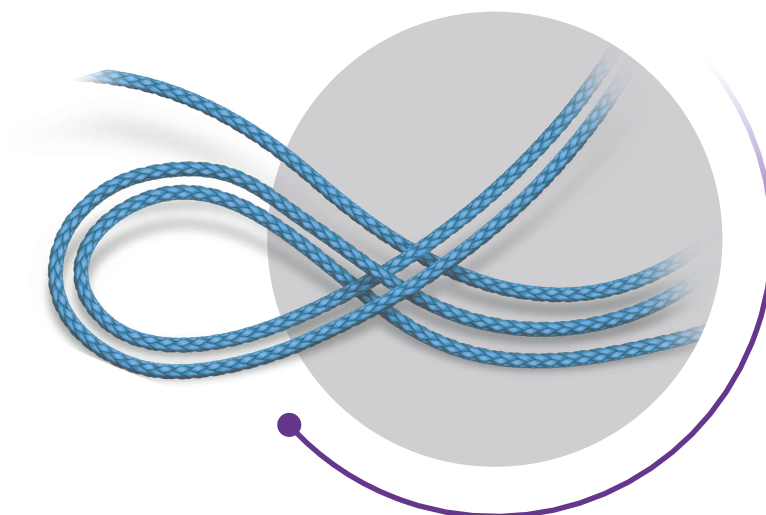

CordFit #2

Fabricadas com polietileno de ultra-alto peso molecular (UHMWPE) de alta resistência para proporcionar segurança nos reparos de tecido mole.

BRO-0023 (02) / SEP-2026

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

IMPLANTE

Código	Descrição
FG-SU011120	Sutura CordFit #2-0 de UHMWPE, azul, de 38" (96 cm) de comprimento.
FG-SU010120	Sutura CordFit #2-0 de UHMWPE, branco-azul, de 38" (96 cm) de comprimento.
FG-SU010102	Sutura CordFit #2 de UHMWPE, branco-azul, de 38" (96 cm) de comprimento.
FG-SU0111027	Sutura CordFit #2 de UHMWPE, azul, de 38" (96 cm) de comprimento.
FG-SU711115	Sutura TapeFit, tipo fita, de 1,5 mm de UHMWPE, azul, de 38" (96 cm) de comprimento.
FG-SU510120	Sutura TapeFit Max, de 2 mm de UHMWPE y PP, branco-azul, de 30" (76 cm) de comprimento.

ANVISA N° 10306840217

A disponibilidade dos produtos pode variar de acordo com o mercado e as aprovações regulatórias locais. Consulte seu representante para obter mais informações.

Promed
Sports Medicine